

SimpliShade™

BULK FILL FLOW



Preprostost enega odtenka z vrhunsko prilagodljivostjo

Dosežite vsako področje zobne anatomije in hkrati prihranite čas s kompozitom SimpliShade Bulk Fill Flow. Potreben je samo en odtenek, da se ujema z vsemi 16 klasičnimi odtenki VITA®, kompozit SimpliShade Bulk Fill Flow pa se zlahka prilagodi dnu kavitete – z izjemno vzdržljivostjo in globino strjevanja.

POTREBEN JE LE EN ODTENEK

Zagotovite si prilagodljivost, vzdržljivost, globino strjevanja in preprostost, ki jo potrebujete s kompozitom SimpliShade Bulk Fill Flow.

Kompozit SimpliShade™ Bulk Fill Flow je indiciran za podlago/podlogo pod neposrednimi restavracijami **razreda I** in **razreda II**, tesnilnimi sredstvi za jamice in fisure, restavracijami majhnih kavitet, restavracijami **razreda III** in **razreda V**, blokiranjem podrezov, izdelavami manjših jeder in popravili začasnih restavracij iz smole in akrila.



Tekoče značilnosti preprostosti enega odtenka



Sistem z enim odtenkom

Z uporabo enega odtenka, ki se brezhibno zlije s stenami kavitete z vsemi 16 klasičnimi odtenki VITA®, vam SimpliShade Bulk Fill Flow prihrani čas pri izbiri odtenkov in upravljanju inventarja.



Prihranite čas

Poenostavite potek dela s samo enim korakom za strjevanje do 5 mm, preden dodate pokrivni sloj.



Bodite na tekočem

Napolnite vsako območje anatomije zoba s samoizravnalno tekočo zalivko, ki se enostavno prilagodi dnu kavitete.



Nizka skrčljivost

Nizka skrčljivost, povezana s polimerizacijo, in stres krčenja SimpliShade Bulkfill Flow zagotavljata trajne restavratorske rezultate.




Dodajte samozavest

Samozavestno obnovite s tekočim kompozitom za zalivko, ki nudi primerljivo ali večjo mehansko trdnost kot konkurenti.



ART³: NOV NAČIN ZA NANOS ZALIVK

Dosežite realistične restavracije z naslednjo generacijo klinično dokazane tehnologije prilagodljivega odziva (ART), ki jo najdete v kompozitih Harmonize™ in OptiShade Universal Composite. Kompozit SimpliShade Bulk Fill s tehnologijo izboljšane prilagodljivega odziva nudi enostavno rokovanje in nizko krčenje.

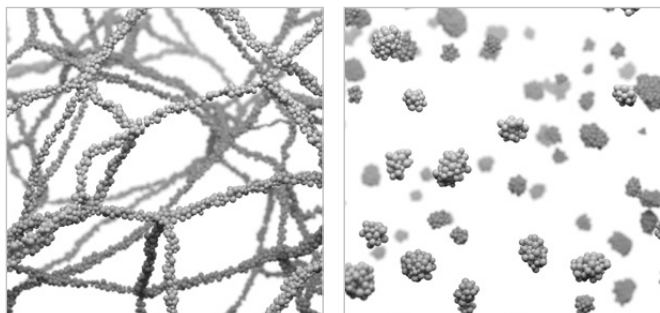


Tehnologija prilagodljivega reološkega odziva za enostavno oblikovanje

ART3 uporablja reološke modifikatorje, ki zmanjšajo viskoznost kompozita med uporabo. Ko končate z oblikovanjem, se viskoznost povrne in anatomija se pred svetlobnim strjevanjem stabilizira – kar zmanjša potrebo po ponovnem oblikovanju.

Tehnologija prilagodljivega odziva mešanja barv za čudovito mešanje

Dosežite izjemno mešanje s posebnimi nanopolnili, ki posnemajo strukture sklenine in na naraven način komunicirajo s svetlobo. Restavracija in zob postaneta praktično nerazločljiva.

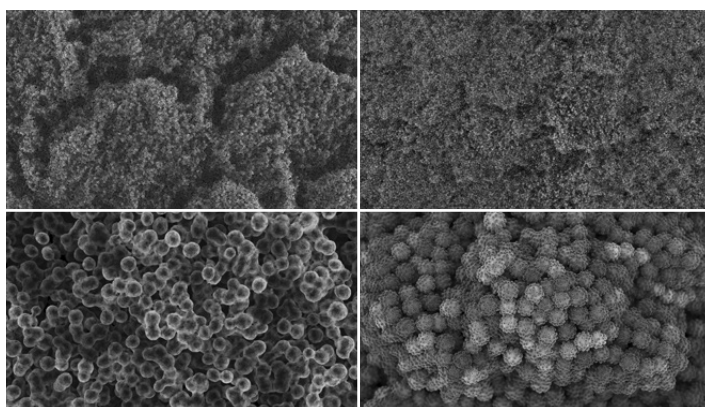


Človeška sklenina

SimpliShade Bulk Fill

Tehnologija prilagodljivega odziva na stres pri krčenju za trajne rezultate

Med polimerizacijo uporablja kompozit SimpliShade Bulk Fill smolo z nizkim krčenjem in inovativno zasnovo nanopolnila, nanopolnila, prepojena s smolo, povečajo elastičnost za zmanjšanje napetosti, posebna prevleka pa zmanjša stres med posameznimi površinami. Z združevanjem treh mehanizmov za zmanjševanje krčenja to izboljša robno prilagoditev in celovitost z zmanjšanjem obremenitve kompozitne restavracije na lepilni plasti za izboljšano robno prilagoditev.

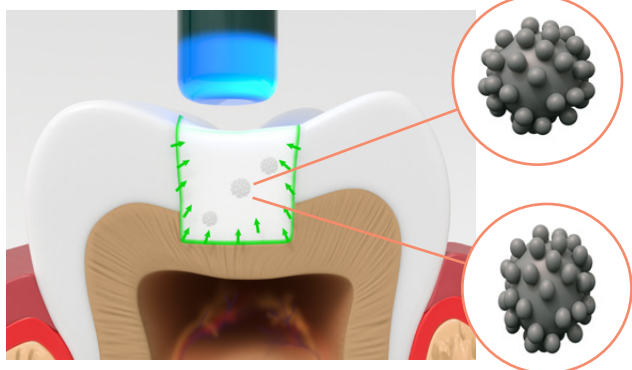


Izvedite več o ART³ in učinku na stres pri krčenju

Skrčitveni stres in stres polimerizacije


V smislu vedenja pri skrčevanju ni bilo opaznih razlik med preizkušenimi materiali. Dva konkurenčna tekoča materiala, SureFil SDR Flow+ in Filtek Bulk Fill Flowable Restorative, sta tekoča kompozita z nizko skrčljivostjo, zato je podobna uspešnost materiala SimpliShade Bulk Fill Flow želen rezultat.

Shrinkage Stress (N)

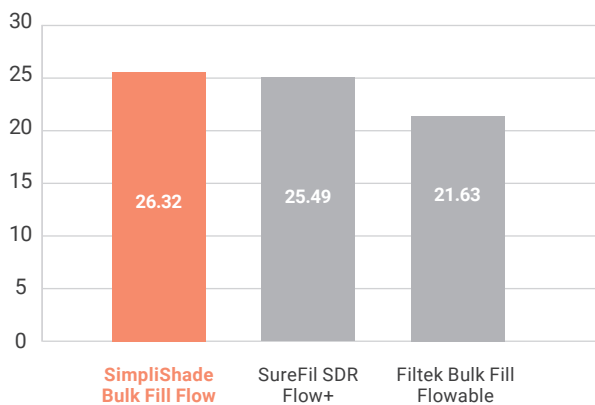


Authors: Prof. Dr. Nate Lawson,
University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL

Polymerization Stress (MPa)

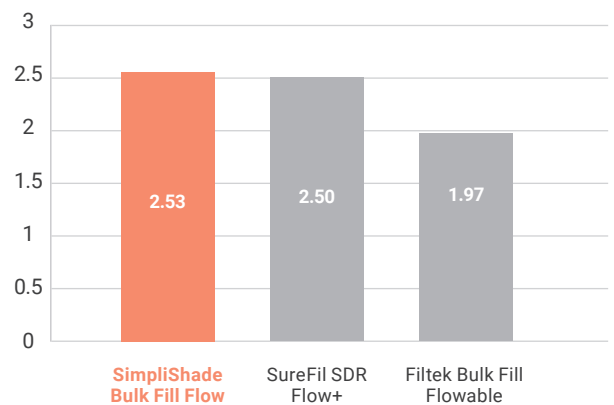

Authors: Drs. Jack L. Ferracane and Carmem S. Pfeifer,
Oregon Health & Science University, Portland, OR

Volumetric wear (mm³)

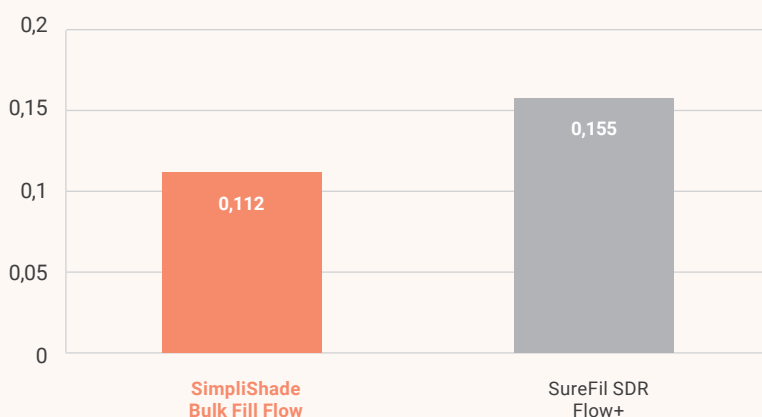

Authors: Prof. Dr. Nate Lawson,
University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL

Stopnja obrabe

SimpliShade Bulk Fill Flow ponuja nižjo stopnjo obrabe na medzobnih stikih kot SureFil SDR Flow+, kar prinaša trajno restavracijo.

Mnenja uporabnikov



“Izjemen način upravljanja popolnoma dopolnjuje tehniko restavriranja Snow-plow iz StyleItaliano.”

Prof. Angelo Putignano*
Ancona, Italija



“Almpresiven in inovativen tekoč kompozit za polnjenje z veliko prilagodljivostjo roba, hitro nanašanje s samoizravnavo in značilnostmi nizke skrčljivosti.”

Dr. Iulian-Costin Lupu*
Iași, Romunija



“Izjemna kombinacija dobrega obvladovanja, nizke prosojnosti in tekočega polnilnega kompozita brez praznin z odlično radiopačnostjo.”

Dr. Hossam Kamel*
Alexandria, Egipt

* Paid consultant for Kerr



Prilaganje

Enostavno prilagodljiv kompozit SimpliShade Bulk Fill Flow zapolni vsako območje anatomije zoba.



Informacije za naročanje




SimpliShade Bulk Fill Flow

Št. dela Opis artikla

37217 Brizga SimpliShade Bulk Fill Flow - 2x 2g

37218 SimpliShade Bulk Fill Flow Unidose, 20 kosov x 0.25g

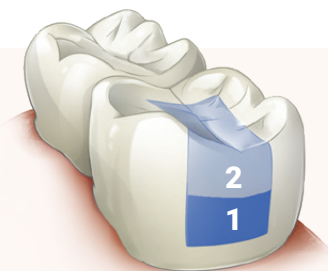

NAJ BO PREPROSTO

Za pokrivni sloj izberite kompozit SimpliShade Bulk Fill ali OptiShade.

1. SimpliShade Bulk Fill Flow 2. Pokrivna plast s SimpliShade Bulk Fill ali OptiShade kompozitom.



SimpliShade Bulk Fill

Št. dela Opis artikla

37211 Brizga SimpliShade Bulk Fill - 4g

37212 SimpliShade Bulk Fill Unidose, 20 kosov x 0.25g



OptiShade Universal Composite

Unidose

Št. dela Opis artikla

37116 Light - 20 kosov

37117 Medium - 20 kosov

37118 Dark - 10 kosov

37119 Bleach White - 10 kosov

37120 Universal Opaque - 10 kosov

Brizga

Št. dela Opis artikla

37111 Light

37112 Medium


37113 Dark

37114 Bleach White

37115 Universal Opaque



Za izjemno visok sijaj uporabite linijo polirnikov Kerr!

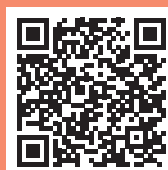

En odtenek.
En korak.
Boljši način
za zalivke.

Za več informacij skenirajte kodo QR ali obiščite to.kerrdental.com/cs/simplishadebulkfill