

KAZALO

CAD/CAM diski in pribor	3–8
Priprava modelov	8–11
Vrtanje, zatički, žaganje	12–13
Podstavki in nosilci	14–15
Lepila in laki	16
Izolirna in čistilna sredstva	17
Silikoni in dubliranje	18–20
Naprava za svetlobno polimerizacijo, plošče za odtisne žlice	21
Globoki vlek in pribor	22–23
Voski	24–28
Instrumenti za modeliranje voska	29–30
Modelirne umetne mase	31
Vlivanje	32–33
Čiščenje	34
Sijaj in lesk	35
Keramične plošče, čopiči	36–37
Peka	38
Pribor za obdelavo keramike	39
Akrilati in izdelava protez	40–42
Laboratorijski pribor	43
Lepljenje	44
Artikulacija	45
Karbidne freze	46–48
Diamantne freze in diski	49–51
Brusni papir in separirni diski	52
Poliranje	53–57
Mikromotor, filter in zračne šobe	58
Orodja, instrumenti	59–63
Shranjevanje in transport	64–65

L A B O R A T O R I J

**NAROČILA****01 5204 800****info@prodent.si****TRGOVINA****01 5204 805**

ivana.logar@prodent.si

01 5204 804

branko.koren@prodent.si

01 5204 819

robert.humar@prodent.si

E-TRGOVINA

e-trgovina@prodent.si

**DOGODKI IN
IZOBRAŽEVANJA****01 5204 802**

urska.brecl@prodent.si

PRODAJA**040 251 686**

ines.stepic@prodent.si

030 427 331

aljaz.ban@prodent.si

040 372 607

saso.balkovec@prodent.si

040 422 989

sinisa.spasojevic@prodent.si

041 637 345

tomaz.kriznik@prodent.si

041 678 540

niki.andjelic@prodent.si

OPREMA**030 709 029**

uros.sraj@prodent.si

JAVNO NAROČANJE**01 5204 807**

igor.kaluza@prodent.si

01 5204 808

lili.trnjanin@prodent.si

RAČUNOVODSTVO**01 5204 810**

prodent@deltas.si

SERVIS**041 844 000**

jernej.primozic@prodent.si

030 704 891

tomaz.kozamernik@prodent.si

**INFORMACIJE****01 5204 802****info@prodent.si****SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA**

Naročilo stopi v veljavo z oddajo le tega s strani kupca prodajalcu, razen v primeru, če prodajalec kupca obvesti, da izbranega blaga ni na zalogi ali da zaradi tehničnih razlogov naročila ni mogoče sprejeti (neporavnane plačilne obveznosti, blokada računa, strokovna usposobljenost,...). Kupec lahko naročilo prekliče v 24 urah od oddaje naročila. Cene so v EUR in ne vključujejo DDV, stroškov transporta, dobave, zavarovanja ali namestitve opreme. Stroški transporta v višini 5,00 €* se obračunajo pri naročilu v znesku do 70,00 €* (*brez DDV). Rok dobave izdelkov (na zalogi) je 2 delovna dneva. Izdelki, ki niso na zalogi imajo rok do 30 delovnih dni. Ne velja za aparate, opremo in pohištvo. Prodajalec si pridružuje pravico do dobave v celoti ali v delnih dobavah, vendar ne več kot v 60 delovnih dneh. V primeru zamude končnega roka dobave, ima kupec pravico do razveljavitve pogodbe, sklenjene z oddajo naročila. Reklamacija se upošteva v 8 delovnih dneh, s priloženim reklamacijskim zapisnikom z navedbo vzrokov vračila (skrita napaka, poškodba, napaka pri dobavi, ipd.). V primeru vračila v neoriginalni ali kakorkoli poškodovani embalaži, prodajalec reklamacije ne bo upošteval. Prodajalec odgovarja za napake izdelkov in obveznosti v skladu z zakonom, vendar za škodo, nastalo z nepravilno uporabo ali posebnimi zahtevami uporabe materiala, ne odgovarja. Prodajalec hrani podatke o posameznih nakupih vsakega kupca. Kupec do svojih posameznih nakupov lahko dostopa le s pisno zahtevo. Vsi podatki so varovani v skladu z veljavnimi zakoni. Garancijski pogoji izdelkov in opreme so razvidni iz garancijskega lista proizvajalca. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in programa, napak pri navedbi podatkov, opisih proizvodov in cen. Fotografije so simbolične in se lahko razlikujejo od dejanskega videza. Pridružujemo si pravico, da objavljeni izdelki niso vedno na zalogi.

Cene veljajo na dan izida. Pogoji določeni s strani proizvajalca so lahko vzrok odstopanj od navedb cen. Cene aparatov so informativne in veljajo do razprodaje zalog.



M+ Cirkonski disk

Cirkonski diski M+W z robom so primerni za uporabo v številnih odprtih sistemih.

074 937	Ø 98 x 14 mm	1 kos	132,00 €
074 938	Ø 98 x 16 mm	1 kos	153,00 €
074 939	Ø 98 x 18 mm	1 kos	164,00 €
074 940	Ø 98 x 20 mm	1 kos	179,00 €
074 941	Ø 98 x 22 mm	1 kos	199,00 €
074 942	Ø 98 x 25 mm	1 kos	223,00 €



M+W Cirkonski disk Fusion

Večdimenzionalni, 9-slojni, visoko prosojen cirkonijev oksid. V proizvodnem postopku se pet plasti predhodno obarvanega prahu iz cirkonijevga dioksida Tosoh z različnimi upogibnimi trdnostmi (≥ 600-1100 MPa) položi ena na drugo, med njimi pa se oblikujejo štiri prehodne plasti. Rezultat je izjemno naraven barvni gradient za živahne in estetske restavracije z do 14 členi.



M+W Cirkonski disk HT

Visoko prosojen, izostatično stisnjen cirkon. Zaradi visoke upogibne trdnosti je mogoče izdelati ogrodja mostičkov z do 14 členi ali popolnoma anatomske restavracije. Za uporabo v številnih odprtih sistemih.

274 915	Ø 98 x 14 mm	1 kos	145,00 €
274 916	Ø 98 x 16 mm	1 kos	159,00 €
274 917	Ø 98 x 18 mm	1 kos	183,00 €
274 918	Ø 98 x 20 mm	1 kos	193,00 €
274 919	Ø 98 x 22 mm	1 kos	209,00 €
274 920	Ø 98 x 25 mm	1 kos	229,00 €



Barva	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
A1	274 574	274 590	274 606	274 622	274 638
A2	274 575	274 591	274 607	274 623	274 639
A3	274 576	274 592	274 608	274 624	274 640
A3,5	274 577	274 593	274 609	274 625	274 641
A4	274 578	274 594	274 610	274 626	274 642
B1	274 579	274 595	274 611	274 627	274 643
B2	274 580	274 596	274 612	274 628	274 644
B3	274 581	274 597	274 613	274 629	274 645
B4	274 582	274 598	274 614	274 630	274 646
C1	274 583	274 599	274 615	274 631	274 647
C2	274 584	274 600	274 616	274 632	274 648
C3	274 585	274 601	274 617	274 633	274 649
C4	274 586	274 602	274 618	274 634	274 650
D2	274 587	274 603	274 619	274 635	274 651
D3	274 588	274 604	274 620	274 636	274 652
D4	274 589	274 605	274 621	274 637	274 653
1 kos	239,00 €	265,00 €	289,00 €	315,00 €	375,00 €

(5 plasti plus 4 prehodne plasti)

	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
Enamel 1	2.33 mm	2.66 mm	3.0 mm	3.33 mm	4.16 mm
Enamel 2	2.33 mm	2.66 mm	3.0 mm	3.33 mm	4.16 mm
Dentin 1	2.33 mm	2.66 mm	3.0 mm	3.33 mm	4.16 mm
Dentin 2	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.25 mm
Alumina	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	6.25 mm

Na voljo v barvah: OM₁, OM₂, OM₃, A₁-D₄



Cirkonski disk HT ML

Visoko prosojen 9-slojni cirkonski disk z visoko upogibno trdnostjo za ogrodja z do 14 členi in popolnoma anatomske restavracije. Upogibna trdnost je približno 1100 MPa. V proizvodnem postopku se pet plasti predhodno obarvanega cirkonskega prahu položi druga na drugo, med njimi pa se oblikujejo štiri prehodne plasti. To omogoča izjemno naraven barvni gradient za čudovito živahne in naravne restavracije.



Barva	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
A1	274 801	274 817	274 833	274 849	274 865
A2	274 802	274 818	274 834	274 850	274 866
A3	274 803	274 819	274 835	274 851	274 867
A3,5	274 804	274 820	274 836	274 852	274 868
A4	274 805	274 821	274 837	274 853	274 869
B1	274 806	274 822	274 838	274 854	274 870
B2	274 807	274 823	274 839	274 855	274 871
B3	274 808	274 824	274 840	274 856	274 872
B4	274 809	274 825	274 841	274 857	274 873
C1	274 810	274 826	274 842	274 858	274 874
C2	274 811	274 827	274 843	274 859	274 875
C3	274 812	274 828	274 844	274 860	274 876
C4	274 813	274 829	274 845	274 861	274 877
D2	274 814	274 830	274 846	274 862	274 878
D3	274 815	274 831	274 847	274 863	274 879
D4	274 816	274 832	274 848	274 864	274 880
1 kos	198,00 €	225,00 €	252,00 €	275,00 €	335,00 €



Cirkonski disk UHT ML

Visoko prosojen, 9-slojni cirkonski disk z visoko upogibno trdnostjo do 600 Mpa za ogrodja s 3 členi in popolnoma anatomske restavracije. V proizvodnem postopku se pet plasti predhodno obarvanega cirkonskega prahu položi druga na drugo, med njimi pa se oblikujejo štiri prehodne plasti. To omogoča izjemno naraven barvni gradient za čudovito živahne in naravne restavracije. 20 % večja prepustnost svetlobe in več kot 65 % večja trdnost kot pri litij-disilikatni steklokeramiki.



Barva	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm
A1	274 948	274 949	274 950	274 951
A2	274 952	274 953	274 954	274 955
A3	274 956	274 957	274 958	274 959
A3,5	274 761	274 771	274 781	274 791
A4	274 762	274 772	274 782	274 792
B1	274 960	274 961	274 962	274 963
B2	274 964	274 965	274 966	274 967
B3	274 763	274 773	274 783	274 793
B4	274 764	274 774	274 784	274 794
C1	274 765	274 775	274 785	274 795
C2	274 968	274 969	274 970	274 971
C3	274 766	274 776	274 786	274 796
C4	274 767	274 777	274 787	274 797
D2	274 768	274 778	274 788	274 798
D3	274 769	274 779	274 789	274 799
D4	274 770	274 780	274 790	274 800
1 kos	198,00 €	225,00 €	249,00 €	269,00 €

M+W select Tekočina za barvanje

Za barvanje ogrodij iz cirkonijevega dioksida v predhodno sintranem surovem stanju. Če je intenzivnost barve prevelika, lahko barvno raztopino na vodni osnovi razredčite z destilirano vodo. Ne vsebuje kislin, zato ne vpliva na kovinske instrumente, delovne površine ali grelne elemente peči za sintranje. Ker tekočina za barvanje M+W ne vsebuje oljnatih snovi, je mogoče izkoristiti celoten kapilarni učinek cirkonija, da hitro in globoko prodre v cirkonsko ogrodje. Pri odrezovanju kapljic sintranja, povezovalnih prečk ali pri naknadnem frezanju teleskopov ne nastanejo svetlejša mesta ali lise.



100 ml:

074 944	A1	1 stekl.	30,90 €
074 945	A2	1 stekl.	30,90 €
074 946	A3	1 stekl.	30,90 €
074 947	A3,5	1 stekl.	30,90 €
074 948	A4	1 stekl.	30,90 €
074 949	B1	1 stekl.	30,90 €
074 950	B2	1 stekl.	30,90 €
074 951	B3	1 stekl.	30,90 €
074 952	B4	1 stekl.	30,90 €
074 953	C1	1 stekl.	30,90 €
074 954	C2	1 stekl.	30,90 €
074 955	C3	1 stekl.	30,90 €
074 956	C4	1 stekl.	30,90 €
074 957	D2	1 stekl.	30,90 €
074 958	D3	1 stekl.	30,90 €
074 959	D4	1 stekl.	30,90 €

M+W select Tekočina za barvanje HT/UHT

Tekočina za barvanje na vodni osnovi, ki je posebej prilagojena HT/UHT cirkoniju, omogoča individualno obarvanje želenih predelov konstrukcij pred sintranjem ter karakterizacijo barve zob. Tekočine ne vsebujejo kislin ali oljnih snovi, zato ne morejo poškodovati instrumentov ali grelnih elementov peči za sintranje. Tekočina prodre globoko v cirkonij in po odstranitvi kapljic sintra ne pušča neželenih madežev. Če je barva premočna, jo lahko preprosto razredčite z destilirano vodo.

Margin	HT	UHT	Body	HT	UHT
Barva	15 ml	15 ml	Barva	15 ml	15 ml
A1/B1	274 921	274 972	A1	274 929	274 980
A2/A3	274 922	274 973	A2	274 930	274 981
A3,5/A4	274 923	274 974	A3	274 931	274 982
B2/D2	274 924	274 975	A3,5	274 932	274 983
B3/B4	274 925	274 976	A4	274 933	274 984
C1/C2	274 926	274 977	B1	274 934	274 985
C3/C4	274 927	274 978	B2	274 935	274 986
D3/D4	274 928	274 979	B3	274 936	274 987
1 kos	23,40 €	29,20 €	B4	274 937	274 988

Incisal	HT	UHT			
Barva	15 ml	15 ml			
light	274 945	274 996	C1	274 938	274 989
medium	274 946	274 997	C2	274 939	274 990
dark	274 947	274 998	C3	274 940	274 991
1 kos	23,40 €	29,20 €	C4	274 941	274 992
			D2	274 942	274 993
			D3	274 943	274 994
			D4	274 944	274 995
			1 kos	15,50 €	24,50 €





Titan 5 disk

Titanijev disk iz visokokakovostne zlitine titana in aluminija (razred 5), ki se lahko zaradi visokih vrednosti loma in trdote uporablja v tehniki kron in mostičkov, pa tudi v konstrukcijah prečk in supra konstrukcijah. Za fasetiranje lahko uporabite katero koli komercialno dostopno titanovo keramiko za žganje.

374 931	Ø 98 x 12 mm	1 kos	132,00 €
374 932	Ø 98 x 13,5 mm	1 kos	145,00 €
374 933	Ø 98 x 15 mm	1 kos	159,00 €
374 934	Ø 98 x 16 mm	1 kos	169,00 €
374 935	Ø 98 x 18 mm	1 kos	183,00 €
374 936	Ø 98 x 20 mm	1 kos	199,00 €
374 937	Ø 98 x 22 mm	1 kos	218,00 €
374 938	Ø 98 x 24,5 mm	1 kos	239,00 €



CoCr super disk

Diski CoCr so izostatični, prašno metalurško izdelani, trdi CoCr diski. Kobalt-krom disk ne vsebuje niklja in berilija. Kovino je mogoče lasersko obdelovati, zaradi dobre homogenosti, ki omogoča večjo hitrost rezkanja, pa je enostavna za obdelavo. Posebej prilagojeno zahtevam tehnologije CAD/CAM. Z robom.

474 920	Ø 98 x 12 mm	1 kos	260,00 €
474 921	Ø 98 x 13,5 mm	1 kos	279,00 €
474 922	Ø 98 x 15 mm	1 kos	299,00 €
474 923	Ø 98 x 18 mm	1 kos	335,00 €
474 924	Ø 98 x 20 mm	1 kos	359,00 €
474 925	Ø 98 x 24,5 mm	1 kos	412,00 €



Peek disk

Biokompatibilna, brezalergijska visoko zmogljiva umetna masa iz polieteteroketona (PEEK) za izdelavo kron, mostičkov, protetičnih baz, supra konstrukcij brez kovin ter za primarne, sekundarne in terciarne konstrukcije. Ta prožni material brez okusa je zaradi svoje majhne teže zelo udoben za pacienta, njegova gladka površinska struktura pa je zelo odporna na obloge.

Barva	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
svetlo siva (light)	374 907	374 908	374 909
Dentin A2 (medium)	374 910	374 911	374 912
roza (rose)	374 913	374 914	374 915
1 kos	209,00 €	239,00 €	280,00 €



M+W select PMMA disk

PMMA disk iz visokokakovostnega obarvanega polimetilmetakrilata za izdelavo kron, mostičkov in bruksističnih opornic. Primeren tudi kot začasni ali dolgoročni provizorij. Material je mogoče fasetirati in prilagoditi z umetnimi masami ali kompoziti. Za še več možnosti prilagajanja so diski na voljo v barvah A1, A2, A3 in B1.

Barva	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
clear	374 916	374 917	374 918
1 kos	52,90 €	58,90 €	64,90 €
A1	374 919	374 920	374 921
A2	374 922	374 923	374 924
A3	374 925	374 926	374 927
B1	374 928	374 929	374 930
1 kos	51,50 €	56,90 €	63,90 €



M+W select PMMA disk ML

Petslojni PMMA disk iz visokokakovostnega obarvanega polimetilmetakrilata za izdelavo kron in mostičkov. Primeren tudi za začasne ali dolgoročne začasne proteze in za stalne zobne proteze. Material je izredno odporen na obloge in ga je mogoče fasetirati ter prilagajati z umetnimi masami in kompoziti. S petimi sloji je dosežen izjemno naraven barvni gradient za čudovito živahne in naravne restavracije.

Barva	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm
A1	274 887	274 891
A2	274 888	274 892
A3	274 889	274 893
B1	274 890	274 894
1 kos	89,00 €	95,00 €

M+W select Super Splint disk

Poliamidni disk z ojačanimi vezmi. Praktično nezlomljiv in zato primeren za izdelavo ortodontskih in miniplast opornic debeline le 0,5 mm. Material ostaja prožen in ima zelo mehko in gladko drsno površino za udobno nošenje. Zaradi minimalne absorpcije vode ne pride do razbarvanja ali slabega zadaha. Barva: prosojna.

274 904	Ø 98 x 15 mm	1 kos	39,00 €
274 905	Ø 98 x 20 mm	1 kos	53,00 €



M+W select Razpršilo Scan Spray Premium

Novo zasnovana razpršilna šoba zagotavlja še finejši razpršilni sloj in s tem natančen prikaz robov in površin predmeta, ki ga je treba skenirati. Material ima pri pršenju izjemne homogene lastnosti, kar pomeni, da ima zelo dober oprijem na zelo gladkih površinah. Razpršilo je zato idealno tudi za prekrivanje kovinskih delov, ne da bi ga nanesli preveč. Material, razpršen neposredno na mavčni model, lahko z mavčnega modela hitro in nežno odstranite s parnim curkom. Primeren je tudi za vse sisteme CAD/CAM.

093 991 200 ml 1 pločevinka **30,90 €**



M+W select Razpršilo Scan Spray

Razpršilo v prahu za izboljšanje optičnih lastnosti modelov za zajem s skenerjem ali kamero v aplikacijah CAD/CAM. Samo za ekstraoralno zajemanje modelov. Model lahko po zajemanju enostavno očistite z vodno paro.

000 906 75 ml 1 pločevinka **19,80 €**
900 906 200 ml 1 pločevinka **28,80 €**



M+W select Vibrator

Zmogljiv in kompakten stresalnik. Brezstopenjsko nastavljava intenzivnost stresanja. Stabilen zahvaljujoč močnim gumijastim sesalnim nogicam, ki preprečujejo zdrs tudi pri visoki jakosti stresanja.

Tehnični podatki: **100 W** **150 W**
 Napetost: 230 V/50 Hz 230 V / 50 Hz
 Napajanje: 150 W 400 W
 Tok: 1,5 A 2,5 A
 Dimenzije: 140 x 140 x 115 mm 210 x 140 x 115 mm
 Teža: 5 kg 10 kg
 Jamstvo: 1 leto 1 leto

094 950 100 W 1 kos **298,00 €**
094 951 150 W 1 kos **329,00 €**



M+W select Power Trimm VD

Zmogljiv obrezovalnik mavca s tihim motorjem z nizkimi vibracijami. Nastavljiv dovod vode poteka prek široko razporejenih šob. Vgrajeni disk za obrezovanje je v celoti prevlečen z diamanti in zagotavlja dobro odstranjevanje materiala. Podporna plošča modela je lahko tudi nagnjena.

Tehnični podatki:

Napetost: 220 V
 Hitrost: 2800 vrt/min.
 Moč: 550 W
 Teža: 21 kg
 Dimenzije (V x Š x G): 38 x 39 x 37 cm
 Jamstvo: 1 leto

Obseg dobave: Obrezovalnik z diamantnim diskom, dovodno/odvodno cevjo (odvodno cev lahko izvlečete), cevni objemkami na napravi in imbusnim ključem za odstranjevanje in nameščanje obrezovalnega diska.

300 907 Power Trimm VD 1 pak. **998,00 €*
 Obrezovalni disk, v celoti prevlečen
 300 908 z diamantno prevleko 1 pak. **560,00 €*
 *** Neto cena, brez možnosti dodatnih popustov.**





Mavec za skeniranje

Ta posebni mavec je bil razvit za optoelektronsko skeniranje v vseh vrstah skenerjev. Preprečuje moteče odseve v opredeljenih valovnih območjih, zaradi česar naknadna obdelava z razpršili za skeniranje ni potrebna. Zaradi kratkega časa strjevanja, ki znaša približno 9 minut, je idealen za posege med enim obiskom.

093 918 slonovina, 5 kg 1 vedro **31,50 €**



Thixo-Stone

Sintetični super trdi mavec s tiksotropno konsistenco. Primeren je za izdelavo zobnih lokov, posameznih krnov in kontrolnih modelov v tehniki s plemenitimi kovinami ter za obdelavo keramike. Posebni lastnosti mavca sta gladkost površine in majhna razteznost. Mavec je odporen na posebno velike mehanske obremenitve, stabilen na robovih in odporen na praske. Inlaye in onlaye lahko na krnih Thixo-Stone enostavno polirate in dokončate. Nato je mogoče krn enostavno očistiti. Barva: rumeno-rjava.

093 933 5 kg 1 vedro **31,20 €**

093 925 20 kg 1 škatla **109,00 €**



Synth-Stone

Sintetični super trdi mavec je primeren za vse master (glavne) in delovne modele, ki se morajo natančno prilegati in biti mehansko zelo trpežni, kot so modeli za žaganje, kontrolni modeli in mojstrski modeli. M+W Synth-Stone se lahko uporablja za plemenite kovine in keramiko ter za protetiko z ulivanjem modelov. Zagotavlja gladko površino, odporno na praske, in trde, na robovih stabilne modele z nizko ekspanzijo. Barva: rjava.

093 932 5 kg 1 vedro **31,20 €**

093 926 20 kg 1 škatla **89,90 €**



Trdi mavec naravni

Naravni trdi mavec razreda III. Za izdelavo modelov protiugriza, modelov za popravilo in vseh delovnih modelov na področju protetike.

25 kg:

093 920 modra 1 škatla **44,90 €**

093 921 rumena 1 škatla **44,90 €**

093 922 naravna bela 1 škatla **44,90 €**



M+W select Ortho-Stone

Ta sintetični trdi mavec ima zelo visoko stopnjo beline in je še posebej primeren za izdelavo modelov protiugriza, popravnih modelov in delovnih modelov za ortodontijo. Modeli z razteznostjo, prilagojeno za določeno področje uporabe, so stabilni in trdni na robovih.

093 927 20 kg 1 škatla **49,90 €**



M+W select Artikulacijski mavec naravni

Primerno za artikulacijo zobozdravstvenih delovnih modelov ter pritrdjevanje ortodontskih modelov in podlaganje protez. Ta mavec se lahko uporablja tudi za izdelavo predločkov in osnov za frezanje.

093 928 20 kg, bela 1 škatla **57,50 €**



M+W select Tekoč mavec za podstavke

Tekoč mavec za podstavke, ki ga je mogoče hitro obdelovati. Omogoča podstavitev več modelov naenkrat. Zaradi izredno dobre pretočnosti je mogoče mavec vlivati v kalup podstavka neposredno iz posodice, pri čemer tudi brez vibriranja ne nastanejo mehurčki.

5 kg:

193 970	bela	1 vedro	28,20 €
193 971	modra	1 vedro	28,20 €



NOVO

M+W select Posoda za mešanje prosojna

Fleksibilne silikonske posode za mešanje alginatov, mavcev in vložnih mas.

193 907	zelena, 105 x 67 mm	1 kos	3,10 €
193 908	oranžna, 85 x 52 mm	1 kos	2,80 €



M+W select Posoda za mešanje mavca

Samočistilne, fleksibilne silikonske posode za mešanje mavcev in vložnih mas, barva: temno zelena.

022 971	Vel. 1, srednja, Ø 12 cm, višina 9 cm	1 kos	4,10 €
022 972	Vel. 2, velika, Ø 13 cm, višina 11 cm	1 kos	4,60 €





Rocktabs

Vezivo za dentalne mavce in fosfatno vezane vložne mase v separatorju mavca. Tudi z rednim čiščenjem separatorjev mavcev ne morete preprečiti nabiranja usedlin v odtočni cevi. Od 15 do 40 % mavca, ki nastane med obrezovanjem, se ne usede v običajnih zbiralnikih mavca in prej ali slej povzroči zamašitev cevi. Za čiščenje zadostuje ena tableta na teden.

093 970	10 kos, vključno s košarico za obešanje	1 pak.	27,20 €
093 971	25 kos, vključno s košarico za obešanje	1 pak.	65,90 €



Nož za mavec Gritman

Iz nerjavečega jekla z odpiralom za kivete.

298 946	Dolžina 16 cm	1 kos	6,90 €
----------------	---------------	-------	---------------



Nož za mavec Buffalo


298 937	Št. 6 (1.)	1 kos	6,90 €
298 952	Št. 7 (2.)	1 kos	6,90 €



Lopatka za mavec Rohge

Upognjena, iz nerjavečega jekla.

298 947	Lopatka za mavec Rohge	1 kos	6,90 €
----------------	------------------------	-------	---------------

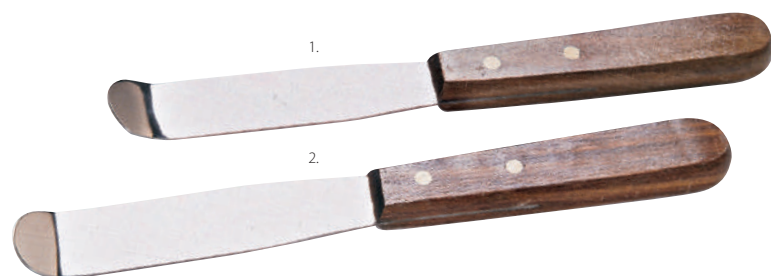

Lopatka za mavec

Zaobljeni konci lopatice omogočajo lažje mešanje mavcev in vložnih mas v posodah za mešanje.

081 934	prožna, dolžina približno 20 cm (1.)	1 kos	8,90 €
081 935	toga, dolžina približno 20 cm (2.)	na kos	8,90 €



Sveder za zatičke

Karbidni svedri za zatičke za vse običajne sisteme pinov v zobozdravstvu. Ko je naprava za zatičke v položaju 0 in je obroček nameščen, so luknje vedno izvrtane na točno določeno globino. Zahvaljujoč nameščenemu obroču ni treba opravljati zamudnega prilagajanja in skrajševanja svedra. Sveder se vstavi v vpenjalne klešče do obročastega omejevalnika, kar preprečuje zdrs svedra.

Sveder za zatičke, primeren za sisteme CL-PS, Gamundia, SAM in serijo Renfert Bi-Pin.

Stopničasti sveder za zatičke, primeren za sistem Pindex.

Stožčasti sveder za zatičke, primeren za sisteme Zeiser, Giroform, Combiflex in LukaBase.

HS sveder za zatičke, primeren za serijo Renfert Bi-Pin in vrtanje z ročnikom.

Sveder za zatičke:

600 920	Ø = 1,58 mm, S = 3,00 mm	1 kos	10,80 €
600 921	Ø = 1,60 mm, S = 3,00 mm	1 kos	10,80 €
600 922	Ø = 1,62 mm, S = 3,00 mm	1 kos	10,80 €

Stopničasti sveder za zatičke:

600 923	Ø = 1,98 mm, S = 3,00 mm	1 kos	22,80 €
600 924	Ø = 2,00 mm, S = 3,00 mm	1 kos	22,80 €
600 925	Ø = 2,02 mm, S = 3,00 mm	1 kos	22,80 €

Stožčasti sveder za zatičke:

600 926	Ø = 2,30 mm, S = 3,00 mm	1 kos	23,90 €
----------------	--------------------------	-------	----------------

Sveder za zatičke za ročnik:

600 927	Ø = 1,60 mm, S = 2,35 mm	1 kos	20,80 €
600 928	Ø = 2,00 mm, S = 2,35 mm	1 kos	20,80 €



Zatički s tulci

Združljivi s sistemi SAM, Gamundia in Heraeus-Splitcast. Skupna dolžina zatičkov: 18,00 mm, tulci: 9,50 mm.

1.000 kos:

098 967	Kovinski zatički	1 pak.	41,20 €
098 968	Kovinski tulci	1 pak.	49,90 €



Zatički z moznikom

Standardna različica, medenina, 1.000 kos:

098 956	Velikost 1 (1.)	1 pak.	49,90 €
098 957	Velikost 2 (2.)	1 pak.	63,90 €
098 954	Velikost 2, kratek (3.)	1 pak.	63,90 €
098 965	Velikost 3 (4.)	1 pak.	119,00 €

Zatički z moznikom z natičnim zatičem, 1.000 kos:

098 966	Velikost 1 (5.)	1 pak.	62,50 €
098 958	Velikost 2 (6.)	1 pak.	75,90 €



Zatički za zobni lok

Za varno pritrditev, tudi pri sprednjih zobeh z majhnim razmakom. Skupna dolžina 64 mm.

100 kos:

098 959	koničast	1 pak.	17,50 €
098 960	ploščat	1 pak.	17,50 €





Ločne žage

Lok in listi za ločne žage za kovine. Dolžina 130 mm.

031 916	Žagin lok	1 kos	24,90 €
12 kos:			
031 917	Žagini listi, srednji (2)	1 pak.	5,00 €
031 918	Žagini listi, fini (1)	1 pak.	5,00 €
031 919	Žagini listi, ekstra fini (2/0)	1 pak.	5,00 €



Brusne kapice

Cenovno ugodna alternativa brusilnikom modelov zobnih lokov. Omogočajo hitro in enostavno brušenje zobnih lokov. Učinkovito odstranjujejo material in so primerni tudi za brušenje umetnih mas. Upoštevajte najv. hitrost 24.000 vrt/min.

stožčaste:

074 910	Nosilec brusnih kopic	1 kos	16,50 €
074 911	Brusne kapice K-080, 10 kos	1 pak.	20,50 €

cilindrične:


074 912	Nosilec brusnih kopic	1 kos	17,50 €
074 913	Brusne kapice K-080, 50 kos	1 pak.	43,90 €
074 914	Brusne kapice K-120, 50 kos	1 pak.	43,90 €



Separirka za mavec 365

Premjer 45 mm omogoča tudi globoke reze na velikih modelih krnov za žaganje. Segmentacija in luknje zagotavljajo hitro odstranjevanje brusnega prahu iz žaginega reza. Robustno glavno rezilo preprečuje oscilacije med delom. Debelina 0,24 mm.


300 972	Separirka za mavec 365	1 kos	44,90 €
----------------	------------------------	-------	----------------

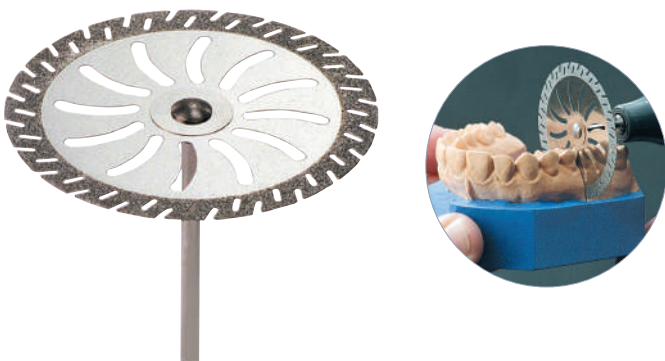

Žaga za mavčne modele

Žaga za mavčne modele z listom dolžine 130 mm. List žage je fiksiran z napetostjo žaginega loka. Tako ni treba uporabljati vijakov in pritrdilnih elementov, menjava žaginih listov pa je hitra in enostavna.

054 908	Žaga za mavčne modele	1 kos	19,90 €
054 909	Žagini listi, 12 kos	1 pak.	16,80 €

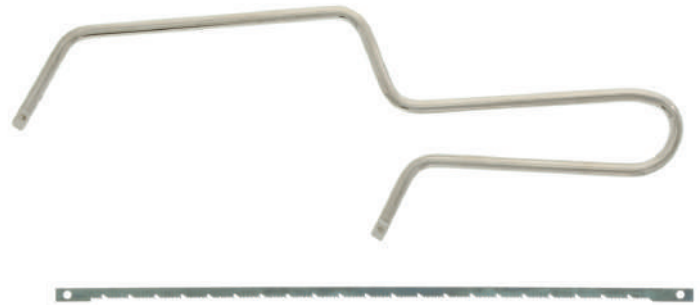

Žagini listi za Pindex

Dolžina 120 mm.

12 kos:

054 910	Debelina 0,18 mm	1 pak.	12,20 €
054 911	Debelina 0,25 mm	1 pak.	11,50 €



Karbidni žagini listi

Iz trdnega karbida, s finimi zobmi.

031 911	Ø 80/19 mm, debelina 0,3 mm (Harnisch + Rieth S-G 303)	1 kos	163,00 €
031 912	Ø 80/16 mm, debelina 0,3 mm (Heraeus CL-MS + Model Tray)	1 pak.	156,00 €





Oblikovalniki podstavkov modelov

Omogočajo čisto in natančno oblikovanje podstavkov za modele.

300 922	majhen	1 kos	4,90 €
300 923	velik	1 kos	5,30 €
300 924	ekstra velik	1 kos	6,20 €



Oblikovalnik podstavkov

076 951	Velikost S z gumijastim obročem, siva (7 cm)	1 kos	29,50 €
076 952	Velikost L z gumijastim obročem, modra (8 cm)	1 kos	29,50 €
076 953	Velikost XL z gumijastim obročem, črna (9 cm)	1 kos	29,50 €



Oblikovalnik podstavkov Splitcast

Iz trpežne gume, enostavne za vzdrževanje. Primerno za tehniko Splitcast.

za zgornjo čeljust:			
076 908	(Š x G x V): 86 x 65 x 16 mm	1 kos	6,50 €
za spodnjo čeljust:			
076 909	(Š x G x V): 87 x 65 x 16 mm	1 kos	6,50 €



Crown-Fix

Kronasti zamaški s prirobnico navzven, posebej za tehniko Splitcast in kot magnetni zadrževalniki. Z lahkoto jih je mogoče vtisniti v mehki mavec in jih pri uporabi magnetov v laboratoriju uporabiti kot izdelke za enkratno uporabo. Posebej cenovno ugodni.


022 921	1.000 kos	1 pak.	75,90 €
045 972	Sredstvo za povečanje oprijema, 100 kos	1 pak.	24,50 €



Retencijski obročki

Za pritrdjevanje delov med modelnimi krni na podstavek. Ponikljani.

098 964	1.000 kos	1 pak.	12,90 €
----------------	-----------	--------	----------------

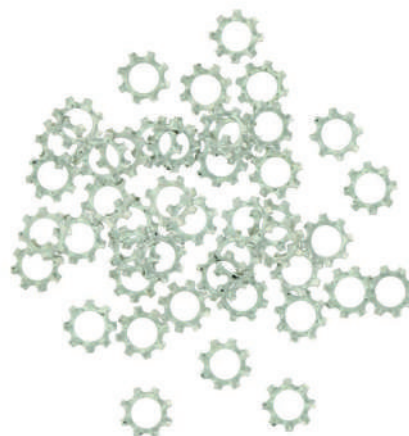



Magnetni sistem za Splitcast

Za hitro odstranjevanje modelov iz artikulatorja.

Magnetna ohišja (zunanji Ø 25 mm, notranji Ø 23 mm):

000 976	10 kos	1 pak.	6,50 €
000 974	100 kos	1 pak.	52,90 €

Retencijski diski (Ø 25 mm):

000 977	10 kos	1 pak.	6,50 €
000 978	100 kos	1 pak.	48,90 €

Okrogli magneti (Ø 20 mm):

000 975	10 kos	1 pak.	4,90 €
000 973	100 kos	1 pak.	29,80 €



Magnetni sistem za Splitcast mini

Majhni magneti in magnetna ohišja so še posebej primerni za ravne podstavke, saj prihranijo prostor. Neodim magnet je zelo močan.

10 kos:

000 997	Okrogli magneti majhni pribl. Ø 20 x 2 mm	1 pak.	23,20 €
000 998	Magnetna ohišja majhna pribl. Ø 20 x 4 mm	1 pak.	12,20 €



Retencijski diski

Primerno za sistema Quicksplit in adesso.

000 993	50 kos:	1 pak.	15,90 €
----------------	---------	--------	----------------





Sekundno lepilo Subibond

Univerzalno cianoakrilatno lepilo s posebno visoko lepilno močjo. V nekaj sekundah zlepi vse materiale. Lepilo z nizko viskoznostjo se uporablja za občutljivo lepljenje, npr. zlomljenih krnov na modelih za žaganje. Srednje viskozno lepilo je idealno za grobo zlomljene predmete z majhnimi vrzelmi, ki jih je treba zapolniti. Stabilno za shranjevanje do 1 leta. Hramba: hladno, suho in temno.

5 g:

093 980	Nizka viskoznost	1 stekl.	3,30 €
093 982	Srednja viskoznost	1 stekl.	3,30 €
	5 steklenič ene vrste ali več	na stekl.	2,90 €

10 g:

093 981	Nizka viskoznost	1 stekl.	3,90 €
000 905	Srednja viskoznost	1 stekl.	3,90 €
	5 steklenič ali več	na stekl.	3,50 €



Trdilec za krne NT

Za utrjevanje površine mavca brez nanosa sloja. Trdilo se hitro vpije v površino mavca in ima zelo dobre lastnosti globinskega strjevanja. Oznake na površini mavca so fiksirane.

200 997	0 µm, 30 ml	1 stekl.	13,90 €
---------	-------------	----------	---------



Subibond Prime

NOVO

Naša univerzalna cianoakrilatna sekundna lepila navdušujejo z izjemno visoko lepilno močjo na različnih materialih. Hramba: hladno, suho in temno. Stabilno za shranjevanje pribl. 1 leto.

Visoka viskoznost: Različica PRIME. Zelo stabilno, za lepljenje zelo poroznih in neravnih površin z velikimi vrzelmi. (Viskoznost: 2500–3000 mPa.s/najv. zmogljivost zapolnjevanja vrzeli: 0,20 mm).

093 956	10 g	1 stekl.	4,50 €
---------	------	----------	--------



Distančni lak NT

Na zraku sušeči se laki z barvnim pigmentom in kovinskimi delci za zelo trde, proti praskam odporne in gladke površine. Debelino plasti je mogoče nadzorovati z večkratnim nanašanjem, pri čemer je debelina plasti lahko odvisna od viskoznosti in vrste čopiča. Laki so na voljo v neprosojnih, dobro pokravnih barvah. Glede na uporabo zagotavljajo kontrast v primerjavi z vsakim mavcem ali modelirnim voskom. Nova vrsta kemične sestave omogoča izdelavo zelo gostih slojev laka, ki so odporni na izparevanje. Lak zdrži visoke mehanske obremenitve ter generira homogene in gladke površine. Poleg tega se zelo hitro suši.

25 ml:

200 991	zlata, 12 µm	1 stekl.	14,95 €
200 992	srebrna, 12 µm	1 stekl.	14,95 €
200 993	modra, 7 µm	1 stekl.	14,95 €
200 994	rdeča, 7 µm	1 stekl.	14,95 €
200 995	prosojna, 3 µm	1 stekl.	14,95 €
200 996	Razredčilo, 20 ml	1 stekl.	8,30 €

M+W select Gips-Sep

Odlično sredstvo za ločevanje mavcev, zlasti za modele za žaganje in tehniko Splitcast. S sistemom Gips-Sep je optimizirana tudi mobilnost kovinskih zatičkov. Gips-Sep se hitro suši in ustvari gladko površino z mikroizolirnim slojem.

000 938 250 ml 1 stekl. **17,90 €**



M+W select Izolirno sredstvo za mavec

Izolirno sredstvo za mavec z odličnim separacijskim učinkom. Brez nastanka sloja. Hkrati zatesni površino mavca. Idealno za tehniko Splitcast.

000 928 Steklenička z razpršilom, 250 ml 1 stekl. **17,50 €**

Steklenička za ponovno polnjenje,
000 929 1 l 1 stekl. **29,90 €**



M+W select Topilo za mavec

Topilo za odstranjevanje ostankov dentalnega mavca iz mešalnih posod, instrumentov, zobnih protez in odtisnih žlic, pH nevtralnno, pripravljeno za uporabo. Učinek čiščenja se v ultrazvočnem čistilniku pri temperaturi 40-50 °C znatno poveča in v približno 5-10 minutah popolnoma odstrani tudi velike količine mavca.

093 975 1 l 1 stekl. **13,90 €**

093 976 5 l 1 ploč. **49,90 €**



M+W select Odstranjevalec mavca Plus

Izjemno hitro specialno čistilo z zelo visoko močjo odstranjevanja dentalnih mavcev in vložnih mas, vezanih na mavec. Deluje zelo selektivno in nežno. Preostalo aktivnost je mogoče vizualno oceniti z zmanjšanim nastajanjem mehurčkov na površini mavca.

000 939 1 l 1 stekl. **17,90 €**

300 939 5 l 1 ploč. **68,90 €**



M+W select Sioplast LAB

Dvokomponentni silikon za gnetenje (adicijska polimerizacija) za zahtevne tehnike.

- Optimalna trdota po Shoru (90 Shore A)
- Enostavno in preprosto mešanje 1:1
- Trdilec v obliki paste ni potreben – čisto delo
- Visoka dimenzijska stabilnost
- Natančna reprodukcija podrobnosti
- Odporen na visoke temperature

053 245	po 420 ml A+B (pribl. 1,6 kg)	1 pak.	48,90 €
053 246	po 2.770 ml A+B (pribl. 10 kg)	1 pak.	189,80 €



M+W select Sioplast LAB Touch

Dvokomponentni silikon za gnetenje (adicijska polimerizacija) za največjo natančnost. M+W Sioplast soft zaradi svojih mehkih lastnosti omogoča še bolj fino reprodukcijo podrobnosti. Kljub temu visoka končna trdota Shore A80 zagotavlja dobro stabilnost. Obe komponenti se zelo enostavno mešata, kar zagotavlja popolno homogenost materiala. Silikon za gnetenje je mogoče enostavno prilagoditi brez velikega pritiska, kar pomeni, da ni nevarnosti, da bi se na primer modeliranje popačilo. M+W Sioplast soft je zaradi dobrih lastnosti skeniranja idealen tudi za uporabo na področju CAD/CAM. Barva: vijolično-modra.

- Zelo natančna reprodukcija podrobnosti
- 80 Shore A
- Enostavno in preprosto mešanje v razmerju 1: 1
- Primeren za mikrolavno pečico
- Odporen na vrenje

053 232	2 x 420 ml A+B	1 pak.	58,50 €
053 233	2 x 2.770 ml A+B	1 pak.	238,00 €



M+W select Sioplast LAB Transparent

Adicijsko vezan material v kartušah. Prozoren silikon za predložke je idealen za oblikovanje WAX-up ali delnih protetičnih restavracij. Material omogoča svetlobno polimerizacijo umetnih mas K+B s pomočjo predložka in služi tudi kot preprost vizualni pregled pri zaključevanju delnih protez z umetnimi masami za proteze. Silikon v razmerju 1:1 je dimenzijsko stabilen, odporen na trganje in ima končno trdoto 70 Shore A.

300 975	2 x 50 ml + konice	1 pak.	34,80 €
----------------	--------------------	--------	----------------



M+W select Sioplast-T

Zelo trda silikonska masa za gnetenje, posebej za zobotehnično uporabo. Mehka, gladka začetna konsistenca, brez sprijemanja, odporna na toploto, visoka dimenzijska stabilnost, natančna reprodukcija podrobnosti. Enostavna uporaba s hladnimi in vročimi polimerizati. Kratek čas strjevanja zaradi hitrega utrjevalca paste. Barva: metino-zelena (Shore A 85), vijoličasto-rdeča (Shore A 95).

Shore A 85:

053 250	Pločevinka, 900 ml (1,6 kg)	1 pločevinka	21,90 €
053 251	Vedro, 5,5 l (10 kg)	1 vedro	87,50 €

Shore A 95:

300 977	Pločevinka, 900 ml (1,6 kg)	1 pločevinka	21,80 €
300 978	Vedro, 5,5 l (10 kg)	1 vedro	87,50 €
153 900	Utrjevalec paste Sioplast T: 60 ml 1 tuba		13,25 €
	3 tube ali več	na tubo	12,75 €



M+W select Chromogel-NF

Trajna dublirna masa z nizko vsebnostjo vlage in čvrsto konsistenco. Primerno za vse jeklene vložne materiale. Zdaj z novo formulo. Temperatura taljenja: 90 °C, temperatura strjevanja: 40 °C, čas želiranja: 45 min.

000 924	6 kg	1 vedro	55,90 €
----------------	------	---------	----------------

M+W select Implant Gum Hard

A-silikon za izdelavo gingivalnih mask iz adicijsko vezanih vinilnih polisiloksanov. To zagotavlja visoko natančnost dela z vsadki. Različica M+W Implant GUM HARD scan zagotavlja dobre rezultate skeniranja zaradi visoke kakovosti slike brez razpršila ali pudra. Zaradi praktičnih kartuš za samodejno mešanje je nemogoče, da bi komponenti zmešali nepravilno. Da bi se izognili nenamerni vezavi med odtisom in masko dlesni, je treba uporabiti M+W Implant GUM Separator v obliki razpršila. Ta prav tako preprečuje vezavo različnih A-silikonske odtisnih mas in po strjevanju ločuje materiale. Čas obdelave: 1:30 min, čas strjevanja: 8:00 min, trdota po lestvici Shore je A70.

	2 x 50 ml kartuše,		
054 920	6 mešalnih kanil roza barve	1 pak.	39,90 €
054 922	Implant GUM Separator: 85 ml	1 pak.	39,90 €



M+W select Chromasil

Dobro tekoča dublirna masa na osnovi adicijsko vezanih silikonov. Krčenje je manjše od 0,1 %. Dublirno maso je mogoče večkrat preliti, material pa je izredno odporen na trganje. Odlivanje se lahko izvede že po 20 minutah. Shore A 17, barva: rdeče-rjava.

000 982	po 1 kg A + B	1 pak.	75,90 €
000 981	po 5 kg A + B	1 ploč.	349,00 €



M+W select Chromasil Fast

Hitro strjevalni adicijsko vezani silikon za dubliranje v razmerju 1:1 s časom strjevanja le 10 minut. To omogoča hitro in časovno varčno delo. Zelo dobro tekoča konsistenca ima najboljše mehanske lastnosti in je idealna za izdelavo dimenzijsko natančnih in podrobnih negativov. Poleg tega svetlo obarvanje omogoča optimalno označevanje površine. V končni konsistenci je material zelo prožen in ima visoko odpornost proti trganju, zato ga je mogoče enostavno rezati, zlasti v primeru podreza. Silikon za dubliranje ne vsebuje dodatnih polnil, ne potrebuje vlažilnih sredstev in je popolnoma brez krčenja. Različica Shore A 17 (komponenta A bela, B roza) je idealna za tehniko kivetiranja. Različica Shore A 26 (komponenta A bela, B zelena) je primerna za zalivanje brez kivetve. Pri tem ne kaže nobenih omejitev pri širjenju vložne mase. Zaradi odsotnosti polnil je M+W Chromasil Fast odličen za dozirnike silikona. Čas mešanja v vakuumu je 40 sekund, natezna trdnost pa > 1,8 MPa.

Shore A 17:

000 971	po 1 kg A + B	1 pak.	77,90 €
000 972	po 5 kg A + B	1 ploč.	363,00 €

Shore A 26:

193 994	po 1 kg A + B	1 pak.	77,90 €
---------	---------------	--------	---------

M+W select Polylux LED

Kompaktna enota za polimerizacijo z LED-svetlobo za utrjevanje materialov za žlice, voskov za svetlobno utrjevanje, lakov za zatesnitev in drugih materialov. S tehnologijo LED se inhibicijski sloj praktično ne ustvari. Zaradi razširljive polimerizacijske komore je mogoče napravo povišati za 24 mm.

- 17 LED-diod v valovnem pasu 365-405 nm
- Mehki zagon
- Časovnik za 30, 60, 120 sekund
- Razširljiva komora za polimerizacijo

Tehnični podatki:

Napetost: 240 V

Moč: 14 W

Dimenzije (V x Š x G): 210 x 192 x 105 mm

Svetlobna komora (standardna) (V x Š x G): 120 x 100 x 50 mm

Valovni razpon: 365-405 nm

Jamstvo: 1 leto

vkjučno z napajalno enoto,
razširitvijo

115 980 komore za polimerizacijo 1 kos **195,00 €**



M+W select LC-Liquid

Čistilna tekočina za odstranjevanje lepljivega inhibicijskega sloja po strjevanju s svetlobo.

245 917 250 ml 1 pak. **14,80 €**

245 918 1 l 1 pak. **53,90 €**



M+W select Plošče za odtisne žlice LC

S temi ploščami za žlice je izdelava funkcijskih žlic in šablon za ugriz povsem preprosta. Predhodno oblikovane plošče se preprosto prilagodijo na blokiran in izoliran mavčni model, odvečni material se odstrani, nato pa se približno 5 minut polimerizirajo v napravi LC. Žlice so popolnoma odporne na zvijanje in jih lahko takoj uporabite. Brez ostrega vonja po monomerih. Enakomerna debelina plasti 2,3 mm in dimenzijska stabilnost sta dodatni prednosti.

50 kos:

500 401	OK-plošče, naravna barva	1 pak.	53,90 €
500 403	UK-plošče, naravna barva	1 pak.	53,90 €
500 402	OK-plošče, roza	1 pak.	53,90 €
500 404	UK-plošče, roza	1 pak.	53,90 €



M+W select Plošče za odtisne žlice LC Premium

Vrhunska kakovost s 25 % večjo upogibno trdnostjo. Predoblikovane plošče so idealne za izdelavo individualnih odtisnih plošč, pripravo podlag za šablone ugriza in izdelavo registracij ugriza. Moteče sprijemanje inhibicijskega sloja je bilo mogoče znatno zmanjšati, kar je olajšalo rokovanje. Zaradi nežnega vonja po poprovi meti je delo zelo prijetno. Material je mogoče dolgo obdelovati pri dnevni svetlobi, pod halogensko svetlobo pa je strjevanje hitrejše (3 do 5 minut). Zaradi odličnih fizikalnih lastnosti je mogoče izdelati zelo stabilne žlice in šablone za ugriz, odporne proti lomljenju.

50 kos:

498 908	OK-plošče, roza	1 pak.	62,90 €
498 929	UK-plošče, roza	1 pak.	62,90 €
498 909	OK-plošče, prozorne	1 pak.	62,90 €
498 930	UK-plošče, prozorne	1 pak.	62,90 €



M+W select Kopidur

Prozorna, trdoelastična plošča, veže se z avtopolimerizatom.

Uporaba: ugrizne, miniplast in retencijske opornice, prov. krone in mostički, fluoridne in vmesne opornice.

10 kos:

266 965	Ø 120 mm, debelina 1,0 mm	1 pak.	17,20 €
266 966	Ø 120 mm, debelina 1,5 mm	1 pak.	19,90 €
266 967	Ø 120 mm, debelina 2,0 mm	1 pak.	25,90 €
266 968	Ø 125 mm, debelina 1,0 mm	1 pak.	17,90 €
266 969	Ø 125 mm, debelina 1,5 mm	1 pak.	20,50 €
266 970	Ø 125 mm, debelina 2,0 mm	1 pak.	26,90 €



M+W select Kopisoft

Gumijasta mehkoelastična folija, ki se ne veže z avtopolimerizatom.

Uporaba: ustni ščitniki, ščitniki proti škrtanju, pozicionerji in dublirne kivete.

10 kos:

266 975	Ø 120 mm, debelina 1,5 mm	1 pak.	16,50 €
266 976	Ø 120 mm, debelina 2,0 mm	1 pak.	19,90 €
266 977	Ø 120 mm, debelina 3,0 mm	1 pak.	27,50 €
266 978	Ø 125 mm, debelina 1,5 mm	1 pak.	16,50 €
266 979	Ø 125 mm, debelina 2,0 mm	1 pak.	19,90 €
266 980	Ø 125 mm, debelina 3,0 mm	1 pak.	27,50 €



M+W select Kopilen

Te viskoelastične folije se ne vežejo na avtopolimerizate.

Uporaba: Opornice za beljenje, jedkanje in zdravila, maske za prenos nosilcev, maske za vlivanje za prov. krone in mostičke, lite kapice in dublirne kivete.

10 kos:

366 909	Ø 120 mm, debelina 0,5 mm	1 pak.	8,20 €
266 972	Ø 120 mm, debelina 0,8 mm	1 pak.	11,90 €
366 908	Ø 125 mm, debelina 0,5 mm	1 pak.	8,50 €
266 974	Ø 125 mm, debelina 0,8 mm	1 pak.	12,50 €



M+W select Kopisoft Bleach

Ta elastična folija je še posebej primerna za izdelavo opornic za beljenje. Ne veže se z akrilatom.

10 kos:

366 911	Ø 120 mm, debelina 1,0 mm	1 pak.	15,50 €
366 913	Ø 125 mm, debelina 1,0 mm	1 pak.	15,50 €



M+W select Škarje za folijo

Iz nerjavečega jekla, 11,5 cm.

181 969	ravne	1 kos	9,20 €
181 970	upognjene	1 kos	9,20 €



M+W select Adapta folija

Za ročni globoki vlek kronskih kopic za sisteme Adapta, Erkomini idr., Ø 42 mm.

Diski za globoki vlek, 100 kos:			
000 960	Debelina 0,6 mm	1 pak.	10,50 €
Nadomestni disk, 200 kos:			
000 961	Debelina 0,1 mm	1 pak.	13,50 €



M+W select Granulat za polnjenje

Za vlaganje modelov v enoto za globoki vlek. Primerno za vse naprave za globoki vlek (z vsebnostjo svinca, nemagnetno).

015 942	1,2 kg	1 pak.	38,50 €
----------------	--------	--------	----------------

M+W select Bloc Out

Univerzalna umetna masa za strjevanje s svetlobo za zapolnjevanje podrezov na mavčnih modelih in kot nadomestek za opornice za beljenje ali nosilce zdravil pred globokim vlekem.

3 ml brizga, 4 kanila za nanašanje			
198 938		1 pak.	15,90 €



M+W select Slim-Polisher

Polirni disk so idealni za dodelavo in poliranje medzobnih prostorov globoko vlečenih opornic. Različica A je namenjena dodelavi, različica B pa predhodnemu poliranju. Vsak paket vsebuje šest podpornih diskov in preprečuje hitro obrabo. Potreben je tudi vijačni trn. Barva: oranžna.

10 kos:			
274 901	Slim-Polisher A	1 pak.	25,90 €
274 902	Slim-Polisher B	1 pak.	29,90 €



Modelirni vosek Allround

Visokokakovostni vosek z izjemno dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Za ta modelirni vosek je značilna rahla elastičnost, majhna prožnost in rahla lepljivost pri pritrdjevanju zob. Hitro strjevanje po nanosu.

Točka strjevanja: 59 °C/vsebnost pepela: 0,002

Velikost plošče: 175 x 80 x 1,25 mm

000 940	500 g	1 pak.	8,50 €
000 941	2,5 kg	1 pak.	37,20 €



Modelirni vosek

Visokokakovostni vosek za plošče v treh različnih kakovostih in dveh različnih debelinah. Zaradi visoke dimenzijske stabilnosti in majhnega krčenja je idealen za vse proteze iz umetnih mas. Zaradi rahle lepljivosti in harmonične elastičnosti je nameščanje preprosto.

Točka strjevanja: Poletni vosek: 59 °C/vsebnost pepela: 0,001,

srednji vosek: 58 °C/vsebnost pepela: 0,002, zimski vosek 57 °C/vsebnost pepela: 0,000

Velikost ploščice: 185 x 83 x 1,25/in 1,50 mm

Poletni vosek, 500 g:

600 900	1,25 mm	1 pak.	8,90 €
600 902	1,50 mm	1 pak.	8,90 €

Srednji vosek, 500 g:

600 904	1,25 mm	1 pak.	8,90 €
600 906	1,50 mm	1 pak.	8,90 €

Zimski vosek, 500 g:

600 908	1,25 mm	1 pak.	8,90 €
600 910	1,50 mm	1 pak.	8,90 €

Poletni vosek, 2.500 g:

600 901	1,25 mm	1 pak.	37,90 €
600 903	1,50 mm	1 pak.	37,90 €

Srednji vosek, 2.500 g:

600 905	1,25 mm	1 pak.	37,90 €
600 907	1,50 mm	1 pak.	37,90 €

Zimski vosek, 2.500 g:

600 909	1,25 mm	1 pak.	37,90 €
600 911	1,50 mm	1 pak.	37,90 €



Modelirni vosek posebni

Visokokakovostni vosek v ploščicah z dobrimi modelirnimi lastnostmi, zaradi katerih ni lepljiv ali prekrhek. Zaradi dveh različnih debelin ploščic ter poletne in zimske kakovosti je vosek primeren za najrazličnejše modeliranje. Zaradi majhnega toplotnega krčenja in visoke stabilnosti na robovih se preprečijo nenamerne spremembe pri modeliranju ali namestitvi. Visoka vsebnost čebeljega voska.

Točka strjevanja: Poletni vosek: 59 °C/vsebnost pepela: 0,002,

zimski vosek 57 °C/vsebnost pepela: 0,000

Velikost ploščice: 175 x 80 x 1,25/in 1,50 mm

Poletni vosek, 500 g:

600 912	1,25 mm	1 pak.	9,50 €
600 914	1,50 mm	1 pak.	9,50 €

Zimski vosek, 500 g:

600 916	1,25 mm	1 pak.	9,50 €
600 918	1,50 mm	1 pak.	9,50 €

Poletni vosek, 2.500 g:

600 913	1,25 mm	1 pak.	39,90 €
600 915	1,50 mm	1 pak.	39,90 €

Zimski vosek, 2.500 g:

600 917	1,25 mm	1 pak.	39,90 €
600 919	1,50 mm	1 pak.	39,90 €





Modelirni vosek Beauty Hard

Zelo trd vosek za modeliranje z visoko odpornostjo proti deformacijam. Vzorci lahko zato brez težav ostanejo v ustih dlje časa. Zaradi rahle lepljivosti je mogoče zobe dobro fiksirati.
Velikost ploščice: 175 x 80 x 2 mm. Barva: roza.

600 930 500 g 1 pak. **13,50 €**



Voščeni grizni robniki

Voščeni grizni robniki v obliki podkve. Dobavljamo v neprozornih barvah, kar znatno olajša vizualno ocenjevanje. Zelo dobra kakovost, nemški proizvajalec.

100 kos:

600 894	rumena, mehko	1 pak.	31,90 €
600 895	oranžna, srednje	1 pak.	31,90 €
600 896	rožnata, trdo	1 pak.	31,90 €



Vosek za odtis ugriza

Vosek v palicah za odtis ugriza. Kakovost kot pri M+W voščeni griznih robnikih. Dobavljamo v neprozornih barvah, kar znatno olajša vizualno ocenjevanje.

1,3 kg:

600 897	rumena, mehko	1 pak.	33,20 €
600 898	oranžna, srednje	1 pak.	33,20 €
600 899	rožnata, trdo	1 pak.	33,20 €



Vosek za zalivanje

Za tehniko ulivanja modelov za zalivanje in paraleliziranje zobnih zaponk. Enostavno strganje in rezanje, zelo gladka površina. Se ne razmaže, ostanke je mogoče odstraniti s kropom ali paro.

300 937 roza, 70 g 1 pločevinka **13,90 €**



Vosek za zalivanje za gnetenje

Za tehniko ulivanja modelov. Za večkratno uporabo, enostaven za gnetenje. Privarčuje dublirni silikon. Ne zlepi se, ostanke je mogoče odstraniti s kropom.

200 979 rdeča, 750 g 1 pločevinka **55,40 €**





Vosek za krone

Usklajene temperature strjevanja (80-83 °C) in utrjevanja. Dimenzijsko stabilen in brez deformacij, z visoko notranjo trdnostjo. Trd, vendar ne krhek. Enostaven za strganje, se ne razmaže, zgori brez ostankov.

300 930 temno modra, 70 g 1 pločevinka **11,50 €**



Modelirni vosek neprozoren

Ta vosek za modeliranje odlikujejo odlične lastnosti modeliranja in strganja. Zaradi visoke vsebnosti mikrovoska je trd, vendar ne krhek, zato ga je zelo enostavno rezkati. Neprozorne sestavine voskov optimizirajo razpršitev in odboj svetlobe tako, da se relief žvečilne površine zelo jasno pokaže. Ni primeren za stiskano keramiko zaradi nizke vsebnosti pigmentnih barvil.

trdo = temperatura strjevanja 80 °C **zelo trdo** = temperatura strjevanja 85 °C

70 g:

300 933	trdo, neprozorna siva	1 pločevinka	12,90 €
300 934	zelo trdo, neprozorna bež	1 pločevinka	12,90 €
300 935	zelo trd, neprozoren dentin	1 pločevinka	12,90 €



Cervikalni vosek

Dobro tekoč za natančno izdelavo robov. Enostaven za strganje, se ne razmaže in zgori brez ostankov. Točka strjevanja 60–64 °C.

300 932 rdeča, 70 g 1 pločevinka **11,90 €**



Rezkalni vosek

Točka strjevanja 67 °C, visoka notranja trdnost in trdota. Dobro tvorjenje drobcev in gladke rezkalne površine. Zgori brez ostankov.

300 931 modra, 70 g 1 pločevinka **10,90 €**



Potopni vosek v peletih

Točka strjevanja 70-71 °C, temperatura obdelave 75-85 °C. Omogoča stabilne, elastične kapice z natančnimi robovi; tudi po večkratni odstranitvi in nameščanju. Zgori brez ostankov.


300 941 rumena, 300 g 1 pločevinka **21,20 €**



Lepilni vosek

Močan lepilni vosek za lepljenje mavčnih in kovinskih delov ter delov iz umetnih mas brez izkrivljanja. Trd in krhek. Preprosto odstranjevanje s kropom ali paro. Barva rdeče-rjava.

200 972 75 g 1 pak. **4,90 €**

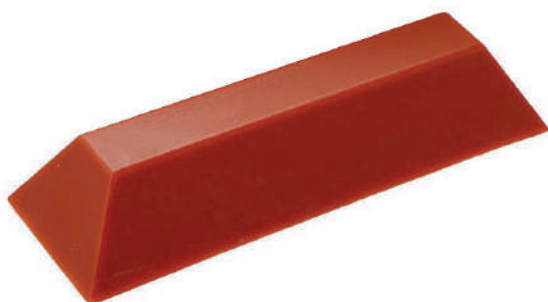

Micro-Wet

Sredstvo za sproščanje silikona in voska, idealno za sproščanje površin dublirnih silikonov in silikonskih kalupov pred vlivanjem v mavec. Primerno tudi za sproščanje delov iz litega voska pred vlaganjem.

000 917 Steklenička z razpršilnikom, 100 ml 1 stekl. **6,90 €**

000 918 1 l 1 stekl. **20,90 €**



Čopič za glajenje voska

Poseben čopič za čiščenje in glajenje voščenih modelov s finimi ščetinami. Ne poškoduje voščenih modelov.


198 966 Čopič za glajenje voska 1 kos **6,95 €**



Voščene šablone

Za tehniko ulivanja modelov. Prilagodljiv pri sobni temperaturi.

013 966	PK, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 967	MK, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 968	TK I, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 969	TK II, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 980	TK III, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 970	RK, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 971	RKG, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 972	KR, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 973	UKB I, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 974	RN I (redka mrežica), 20 ploščic	1 pak.	26,20 €
013 975	RN II (gosta mrežica) 20 ploščic	1 pak.	26,20 €
013 976	RN III (luknjasta retencija), 20 ploščic	1 pak.	26,20 €
013 977	PR I majhen, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 978	PR II velik, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €
013 979	SK, 10 ploščic	1 pak.	20,90 €

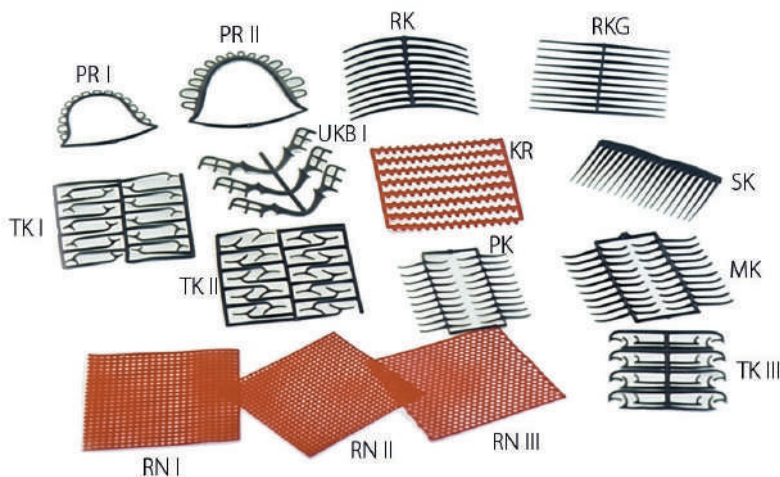

Voščena žica

Odlikujejo ga optimalna sestava čistih naravnih voskov in izjemna stabilnost z dobrimi lastnostmi oblikovanja. Oblikovane voščene žice so dimenzijsko stabilne, kar preprečuje, da bi se voščena konstrukcija mostička deformirala. Voščena žica M+W ne vsebuje neprozornih sestavin, zato je idealna tudi za delo s polno keramiko.

turkizna = trdo

modra = srednje trdo

Zvitek 250 g:

200 902	turkizna, debelina 2,5 mm Ø	1 zvitek	13,90 €
200 903	turkizna, debelina 3,0 mm Ø	1 zvitek	13,90 €
200 904	turkizna, debelina 3,5 mm Ø	1 zvitek	13,90 €
200 905	turkizna, debelina 4,0 mm Ø	1 zvitek	13,90 €
200 906	turkizna, debelina 5,0 mm Ø	1 zvitek	13,90 €
200 912	modra, debelina 2,5 mm Ø	1 zvitek	13,90 €
200 913	modra, debelina 3,0 mm Ø	1 zvitek	13,90 €
200 914	modra, debelina 3,5 mm Ø	1 zvitek	13,90 €
200 915	modra, debelina 4,0 mm Ø	1 zvitek	13,90 €
200 916	modra, debelina 5,0 mm Ø	1 zvitek	13,90 €



Lepilo za vosek

Lepilo, ki zgori brez ostankov, za pritrdjevanje izdelanih voščenih delov na dvojnike modelov iz vložne mase. Lepilo za vosek se nanese na tanko, da se končni deli prilagajo dvojniku. Redčilo, ki ga vsebuje, preprečuje izsušitev lepila.

000 925	30 ml	1 stekl.	11,20 €
---------	-------	----------	---------





M+W select Indu-Heat

Indukcijski grelec za segrevanje nožev za vosek, sond in drugih zobozdravstvenih instrumentov.

Tehnični podatki:

Napetost: 230 V

Moč: 100 W

Dimenzije (V x Š x G): 95 x 92 x 270 mm

Teža: 550 kg

Jamstvo: 1 leto


300 905 Indu-Heat 1 kos: **249,00 €**

300 906 Zaščitni pokrovček za Indu Heat 1 kos: **5,20 €**

M+W select Instrumenti za modeliranje

298 941 LeCron (1.) 1 kos **5,50 €**

298 942 Zahle (2.) 1 kos **5,50 €**

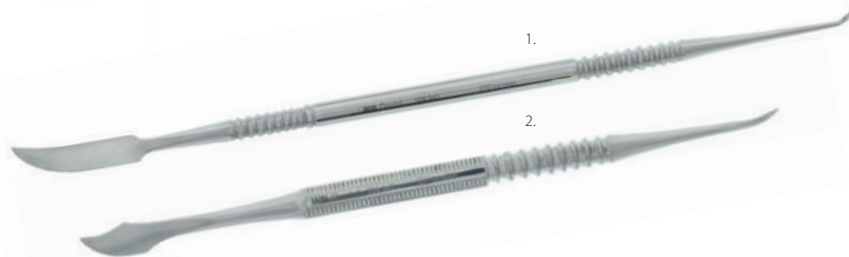

M+W select Instrumenti za modeliranje Color

181 967 LeCron (1.) 1 kos **10,20 €**

181 968 Zahle (2.) 1 kos **10,20 €**

M+W select P.K. Thomas instrumenti za modeliranje voska

040 901 PKT-1 (1.) 1 kos **5,50 €**


040 902 PKT-2 (2.) 1 kos **5,50 €**

040 903 PKT-3 (3.) 1 kos **5,50 €**

040 904 PKT-4 (4.) 1 kos **5,50 €**

040 905 PKT-5 (5.) 1 kos **5,50 €**

040 906 Komplet s 5 kosi. (PKT 1–5) 1 pak. **25,90 €**

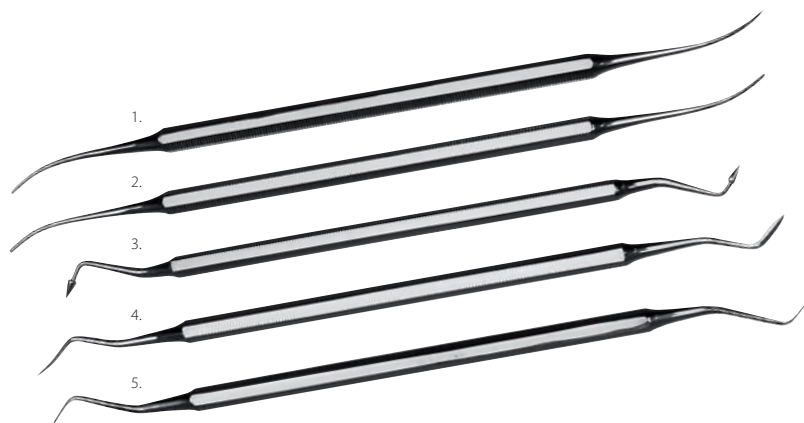

M+W select Thomas-Color

Instrumenti za modeliranje voska z aluminijastimi ročaji.

298 930 PKT-1, zlata (1.) 1 kos **12,90 €**

298 931 PKT-2, zelena (2.) 1 kos **12,90 €**

298 932 PKT-3, modra (3.) 1 kos **12,90 €**

298 933 PKT-4, rdeča (4.) 1 kos **12,90 €**

298 934 PKT-5, srebrna (5.) 1 kos **12,90 €**

298 935 Komplet s 5 kosi (PKT 1–5) 1 pak. **58,90 €**



Nož za vosek po Fahnenstocku

Iz nerjavečega jekla.

298 944	Dolžina 13 cm	1 kos	4,50 €
298 945	Dolžina 17 cm	1 kos	4,90 €



Nož za vosek po Fahnenstocku

Lesen ročaj. Iz nerjavečega jekla.

181 971	Dolžina 13 cm	1 kos	4,20 €
181 972	Dolžina 17 cm	1 kos	4,40 €



Nož za vosek po Lessmannu

Z vdolbino, iz nerjavečega jekla.

298 940	Dolžina 13 cm	1 kos	4,20 €
298 954	Dolžina 17 cm	1 kos	5,20 €



Nož za vosek po Lessmannu

Z vdolbino, iz nerjavečega jekla.

181 973	Dolžina 13 cm	1 kos	4,20 €
	5 kos, ali več	na kos	3,70 €
181 974	Dolžina 17 cm	1 kos	4,40 €
	5 kos, ali več	na kos	3,90 €



Nož za vosek Antkoviak

Z ročajem iz umetne mase in zamenljivim rezilom.

298 939	Nož za vosek Antkoviak	1 kos	5,20 €
298 938	Nadomestno rezilo	1 kos	3,20 €



Nož za vosek Ermert

Z lesenim ročajem.

298 936	Nož za vosek Ermert	1 kos	5,50 €
----------------	---------------------	-------	---------------



M+W select Blue-Tec LC

Svetlobno polimerizirajoča modelirna umetna masa v obliki gela, ki zgori brez ostankov, za modeliranje atečmenov, teleskopskih in stožčastih kron, posameznih implantatov, lepilnih mostičkov in za blokiranje odlitkov. Zaradi visoke stabilnosti omogoča modeliranje modelov za ulivanje brez potrebe po duplikatih. Strjevanje poteka v običajni polimerizacijski napravi z valovnim območjem 320-500 nm.

093 972	3 g brizga, 2 kanili	1 pak.	19,50 €
093 973	4 x 3 g brizge, 8 kanil	1 pak.	69,50 €



M+W select Poly Resin

Hitro strjevalna umetna masa za modeliranje (hladni polimerizat), ki zgori brez ostankov, primerna za stožčaste krone, dele polzil in sekundarne dele, teleskopske krone, konstrukcije z zapahi, krone s sidrnim trakom itd., inlaye, sublingvalne loke, palatalne konstrukcije, povezovalne dele, zaponke, pritrdjevanje s spajkanjem pri vlaganju.

**Komplet (50 ml tekočine,
100 g prahu, 1 silikonska posoda
5 ml, 3 PE posode 25 ml, čopič)**

093 983	rdeča	1 pak.	43,20 €
093 984	dentin	1 pak.	43,20 €
093 985	Tekočina, 100 ml	1 pak.	25,90 €
093 986	Tekočina, 250 ml	1 pak.	46,90 €
093 987	Prah, rdeča, 100 g	1 pak.	25,90 €
093 988	Prah, rdeča, 300 g	1 pak.	55,90 €



M+W select Silikonske posode

Cenovno ugodne silikonske posode (prosojne) za mešanje umetnih mas.

098 997	majhen	1 kos	3,90 €
098 998	srednja	1 kos	6,90 €
098 999	velik	1 kos	10,90 €





Podstavki za vlivanje

Za izdelavo livnih lijakov.

000 931	Velikost 1x	1 kos	2,90 €
000 932	Velikost 3x	1 kos	3,90 €
000 933	Velikost 6x	1 kos	4,90 €
000 934	Velikost 9x	1 kos	5,90 €
000 957	Univerzalno (za vse velikosti kivet)	1 kos	7,50 €



Livne kivete

Cenovno ugodne livne kivete, brez oksidne plasti... Iz visokokakovostnega posebnega jekla.

000 953	Velikost 1x	1 kos	4,20 €
000 954	Velikost 3x	1 kos	5,50 €
000 955	Velikost 6x	1 kos	6,50 €
000 956	Velikost 9x	1 kos	7,20 €



Ekspanzijska folija

Za izdelavo modelnih livnih kivet. Do 25 % prihranka vložne mase zaradi neposrednega prilagajanja kivetirnega traku na podstavek modela, kar omogoča manjše kivete. Rebrasta struktura zračne blazine omogoča prosto ekspanzijo.

000 987	Zvitek, 25 m	1 zvitek	54,20 €
----------------	--------------	----------	----------------



Ekspanzijski trak

Vložni trakovi iz papirja iz keramičnih vlaken za kivete za ulivanje v tehniki kron in mostičkov. Ekspanzijski trak za kivete M+W zagotavlja optimalno raztezanje vložne mase, preprečuje nastanek razpok in olajša odstranjevanje po litju. 55 mm širine za popolno oblaganje kivet za ulivanje brez robov.

Zvitek s 25 m:

000 927	širina 50 mm	1 zvitek	21,90 €
000 947	širina 55 mm	1 zvitek	24,50 €



CP-Protect

Zaščita za talilni lonček v razpršilu. Podaljša življenjsko dobo talilnega lončka in zmanjšuje ostanke litine v lončku. Uporablja se lahko za vse livarske talilne lončke in postopke taljenja.

245 912	100 ml	1 kos	36,50 €
----------------	--------	-------	----------------



M+W select Chromalloy MG

Zlitina za ulivanje neplemenitih kovin na osnovi kobalta za tehniko ulivanja po modelu v skladu s standardom DIN EN ISO 22674, tip 5. Chromalloy MG je klasična modelna zlitina za ulivanje, namenjena protetiki z zaponkami z zelo dobrimi lastnostmi, kar zadeva tekočnost in zapolnjevanje kalupa v celoti. Ulite izdelke je mogoče optimalno dodelati in polirati.

Tehnični podatki:

Meja prožnosti 0,2 %: 650 MPa

Raztezek pri pretirganju: 5,0 %

E-modul: 220 GPa

Trdota po Vickersu: 350 HV10

Interval taljenja: 1.280 – 1.360 °C

Temperatura ulivanja: 1.450 °C

094 971 1 kg 1 pak. **269,00 €**



M+W select Chromavit

Tekoče, za uporabo pripravljeno trdilo za potopitev za tehniko ulivanja modelov. Za hladno uporabo. Naknadno sušenje ni potrebno.

000 914 1 l 1 stekl. **16,50 €**



M+W select Chromalloy KB

Zlitina za ulivanje neplemenitih kovin na osnovi kobalta za kovinsko keramiko v skladu s standardom DIN EN ISO 22674, tip 4. Chromalloy KB je mogoče zaradi nizke trdote optimalno obdelovati in polirati. Zaradi odličnih lastnosti je še posebej primerna za krone, mostičke in rezkanje. Zlitina je odporna proti koroziji ter ne vsebuje berilija in galija. Material je mogoče fasetirati z vsemi kovinskokeramičnimi materiali, ki so na voljo na trgu. Sestava Co: 64,0 Cr: 21,0 Mo: 6,0 W: 6,0.

Tehnični podatki:

Meja prožnosti: 570 MPa

Raztezek pri pretirganju: 10,0 %

E-modul: 194 GPa

WAK 25 – 500 °C: 13,9 x 10⁻⁶ K⁻¹

WAK 25 – 600 °C: 14,0 x 10⁻⁶ K⁻¹

Natezna trdnost: 734 MPa

Trdota po Vickersu: 286 HV10

Interval taljenja: 1.309–1.417 °C

Temperatura ulivanja: 1.460 °C

094 974 1 kg 1 pak. **328,00 €**



M+W select Zaščitna pasta za spajkanje

Pasta za zaščito pred vročino, ki ščiti umetne mase, keramiko itd. pred vročino varjenja in spajkanja. Dele, ki jih je treba zaščititi, preprosto prekrijte z zaščitno pasto za spajkanje. Po spajkanju lahko pasto preprosto odstranite pod tekočo vodo s pomočjo krtačke.

000 915 250 g 1 pločevinka **9,95 €**



M+W select Vaporboy


Ta parni čistilec, ki se polni ročno, je idealen za čiščenje zobotehničnih izdelkov in umazanih instrumentov. Z močno nasičeno paro lahko nežno in hitro odstranite voske, maščobe, izolirna sredstva in umazanijo. Upravljanje z eno roko in nastavljen pritisk omogočata praktično in preprosto delo. Kontrolna lučka kaže, kdaj je rezervoar za vodo prazen in ga je treba ponovno napolniti.

Tehnični podatki:

Omrežni priključek: 230 V/50 – 60 Hz
Vhodna moč: 1.100 W
Dimenzije (V x Š x G): 290 x 330 x 330 mm
Teža: 9 kg
Tlak: 0–4 bar
Prostornina rezervoarja: 3,5 l
Jamstvo: 2 leti

000 994 VaporBoy 1 kos **999,00 €***

* Neto cena, brez možnosti dodatnih popustov.

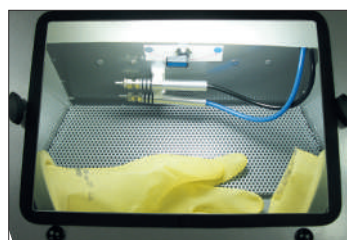

M+W select Peskalnik

Peskalna enota z veliko in dobro LED-osvetljeno komoro omogoča enostavno obdelavo različnih obdelovancev. Naprava ima pnevmatski nožni pedal in dva modula rezervoarja za peskanje. Desni modul posode za peskanje, označen z modro barvo, je opremljen s šobo 0,8 mm za velikost zrn 50-110 µm, levi modul posode za peskanje, označen s črno barvo, pa je opremljen s šobo 1,0 mm za velikost zrn 90-150 µm. Levi modul rezervoarja za peskanje je mogoče nadgraditi za uporabo peska velikosti 150-250 µm z uporabo 1,3 mm šobe, ki je vključena v obseg dobave. Z vgrajenim vrtljivim stikalom v komori lahko module rezervoarja upravljate ločeno, ne da bi prekinili delo. Integrirani sesalni nastavki na zadnji strani omogočajo enostavno priključitev zunanjega sesalnega sistema. Zamenljiva zaščitna folija za steklo, ki je vključena v obseg dobave, je namenjena zaščiti vgrajenega kontrolnega okna pred obrabo. Napravo je mogoče po želji nadgraditi z oknom iz kaljenega stekla za še boljši in jasnejši pogled. Peskalnik ima tudi vgrajen regulator tlaka in separator kondenzata, ki ščiti peskalna sredstva pred vlago iz zračnega kompresorja.

Tehnični podatki:

Napetost: 220–230 V
Moč LED-osvetlitve: 10 W
Dimenzije (V x Š x G): 380 x 430 x 400 mm
Dimenzije sesalnega nastavka: zunanji Ø- 35 mm, notranji Ø 32 mm, D = 40 mm
Delovni tlak: 1–7 bar
Prostornina rezervoarja za peskanje: pribl. 700 g
Teža: 13 kg
Jamstvo: 1 leto

700 940	Peskalnik	1 kos	710,00 €*
700 901	Akrilno varnostno steklo	1 kos	17,20 €*
700 902	Kaljeno varnostno steklo	1 kos	42,50 €*
700 903	Peskalna šoba 0,8	1 kos	44,50 €*
700 904	Peskalna šoba 1,0	1 kos	44,50 €*
700 905	Peskalna šoba 1,3	1 kos	44,50 €*
700 906	Peskalna šoba 1,4	1 kos	44,50 €*
Cev za stisnjen zrak 8 x 6 mm,			
700 930	tek. meter	1 kos	5,90 €*
700 931	Spojka DN 7,2	1 kos	6,20 €*

* Neto cena, brez možnosti dodatnih popustov.

M+W select Perlasoft

Sredstvo za peskanje s kroglicami SiO₂ za poliranje in zgostitev površin plemenitih kovin. Uporablja se lahko tudi za obdelavo jekla. Izdelek nemške kakovosti.

5 kg:			
093 910	srednje, 150 µm	1 ploč.	17,90 €
093 912	fino, 50 µm	1 ploč.	17,90 €
25 kg:			
093 911	srednje, 150 µm	1 škatla	79,90 €
093 913	fino, 50 µm	1 škatla	79,90 €



M+W select Chromokorund

Al₂O₃ najčistejši aluminijev oksid (korund), bela. Visoka trdota (Mohs 9) in ostrina zrn zagotavljata visoko moč in kratek čas peskanja. Izdelek nemške kakovosti.

5 kg:			
093 915	ekstra grobo, 250 µm	1 ploč.	31,50 €
093 901	grobo, 150 µm	1 ploč.	31,50 €
093 904	srednje, 110 µm	1 ploč.	31,50 €
093 907	fino, 50 µm	1 ploč.	31,50 €
25 kg:			
093 916	ekstra grobo, 250 µm	1 škatla	136,00 €
093 902	grobo, 150 µm	1 škatla	136,00 €
093 905	srednje, 110 µm	1 škatla	136,00 €
093 908	fino, 50 µm	na škatlo	136,00 €



M+W select Chromalloy elektrolit

Odličen za poliranje zlitin CoCrMo. S Chromalloy elektrolitom lahko skrajšate čas poliranja. Dolg rok trajanja, pripravljen za uporabo. Primeren za vse polirne naprave. Po uporabi je treba tekočino odstraniti ločeno.

000 920	1 l	1 stekl.	17,20 €
000 958	5 l	1 ploč.	65,80 €



Mešalna plošča za keramiko

Omogoča mešanje mas za vsaj 2 barvi (dentin, incizalni in cervikalni material posebej) in 4 efektnih mas, poleg tega pa ima tudi ravne površine. Pokrov ščiti mase pred prahom in izsušitvijo.

698 973 pribl. 15,5 x 9,5 cm 1 kos **36,40 €**



Mešalna plošča za barve

Za širok nabor odtenkov za tehniko barvanja. 30 vdolbin za barve, velika vdolbina za glazirno maso in velika površina za mešanje. S pokrovom proti prahu.

698 974 15,5 x 9,5 cm 1 kos **36,40 €**



Čopič za opaker

Ploščati čopič iz umetnih ščetin Toray za enostaven in enakomeren nanos opaker mas.

498 960	Velikost 0 (1.)	1 kos	3,30 €
498 961	Velikost 2 (2.)	1 kos	3,50 €
498 962	Velikost 4 (3.)	1 kos	3,75 €



Kombinirani čopič

Za modeliranje voska. Ena stran Rotmarder-Kolinsky 1a vel. 3, druga stran kitajske ščetine vel. 8.

198 965 Kombinirani čopič 1 kos **7,80 €**

Posamezna glava čopiča:

498 959 Rotmarder-Kolinsky 1a vel. 3, 10 kos 1 pak. **33,90 €**





Čopič Rotmarder-Kolinsky

Iz najbolj finih in najbolj odpornih ščetin Kolinsky-Rotmarder. Dolga življenjska doba, rdeče lakiran lesen ročaj.

198 967	Velikost 00 (1.)	1 kos	2,90 €
198 968	Velikost 0 (2.)	1 kos	2,90 €
198 969	Velikost 1 (3.)	1 kos	3,20 €
198 970	Velikost 2 (4.)	1 kos	3,80 €
198 971	Velikost 3 (5.)	1 kos	4,20 €
198 972	Velikost 4 (6.)	1 kos	7,20 €
198 973	Velikost 5 (7.)	1 kos	7,90 €
198 974	Velikost 6 (8.)	1 kos	9,50 €
198 975	Velikost 7 (9.)	1 kos	12,90 €
198 976	Velikost 8 (10.)	1 kos	14,50 €
198 977	Velikost 10 (11.)	1 kos	27,90 €
198 978	Velikost 12 (12.)	1 kos	55,50 €



Sintetični čopič

Keramični čopič s sintetičnimi ščetinami. Zelo dolga življenjska doba. Goste ščetine, lakiran lesen ročaj in srebrno okovje.

598 941	Velikost 00 (1.)	1 kos	2,65 €
598 942	Velikost 0 (2.)	1 kos	2,65 €
598 943	Velikost 1 (3.)	1 kos	2,80 €
598 944	Velikost 2 (4.)	1 kos	2,80 €
598 945	Velikost 3 (5.)	1 kos	3,10 €
598 946	Velikost 4 (6.)	1 kos	3,10 €
598 947	Velikost 5 (7.)	1 kos	3,50 €
598 948	Velikost 6 (8.)	1 kos	3,95 €
598 949	Velikost 7 (8.)	1 kos	3,95 €
598 950	Velikost 8 (9.)	1 kos	5,10 €
598 951	Velikost 10 (10.)	1 kos	6,85 €





Stožčasti zatiček

Praktični komplet za peko zobne keramike. Prilagodljivost zaradi prilagoditve razdalje (do najv. 12 mm). Dolga življenjska doba.

Komplet:

4 x T1 in 1 x T3, T5, T7, T9			
in T11, po 2 x podstavek za peko			
798 901	in 2 x gorljiva vata	1 komplet	84,90 €
798 908	Podstavek za peko	1 kos	9,20 €
798 909	Gorljiva vata	1 kos	6,50 €
5 kos:			
798 902	T1 (1.)	1 pak.	24,95 €
798 904	T5 (2.)	1 pak.	24,95 €
798 905	T9 (3.)	1 pak.	34,80 €
798 906	T3 (4.)	1 pak.	45,60 €
798 907	T7 (5.)	1 pak.	45,60 €
798 900	T11 (6.)	1 pak.	45,60 €

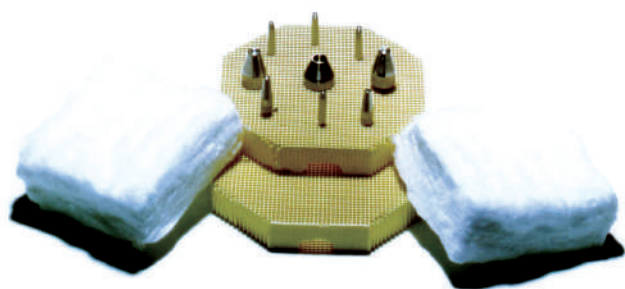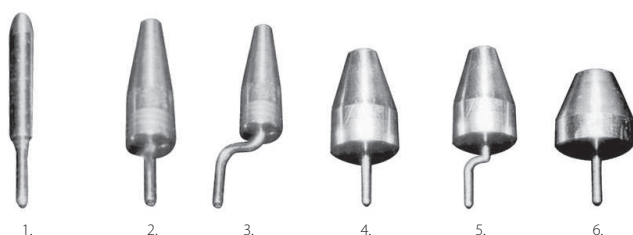

Easy-Fire

Najmanjša in prostorsko najbolj varčna keramična peč za zobozdravnike in zobotehnične laboratorije. Z napravo EASY-FIRE lahko keramične izdelke hitro in enostavno obarvate ali glazirate. Zaradi svoje vitke in lahke zasnove je naprava idealna tudi za hitro barvanje/korigiranje neposredno na mestu uporabe. Vakuumska črpalka ni potrebna. Enostavno in intuitivno upravljanje z vrtljivim gumbom, 9 pomnilniških mest za programe, prosto nastavljiva hitrost segrevanja in končna temperatura.

Tehnični podatki:

Napetost: 230 V/50-60 Hz

Moč: 800 W

Temperatura: najv. 1.100 °C

Hitrost segrevanja: 25 °C/min

Dimenzije naprave (D x Š x V): 205 x 155 x 220 mm

Dimenzije nosilca za obdelovance (D x Š): 55 x 55 mm

Teža: 3,6 kg

Jamstvo: 1 leto

Obseg dobave:

Keramična peč,			
245 930	omrežni vtič, nosilec za obdelovance	1 kos	1.590,00 €
245 931	Nosilec za obdelovance	1 kos	13,50 €



Set za peko

Nosilec za obdelovance s številnimi celicami za držala obdelovancev. Izdelan iz visokotemperaturno stabilne zlitine brez oksidne plasti.

2 osmerokotna nosilca za obdelovance, 2 naviti držali, po 4			
000 911	upognjena in 4 kotna držala	1 komplet	29,30 €
000 899	M+W pahljačasti zatiček, 5 kos.	1 pak.	26,90 €



Potisni bat

Za vso prešano keramiko. (D x Ø) 35 mm x 13 mm.

Potisni bat Alox za večkratno uporabo (1.)			
245 915		1 kos	38,90 €
Potisni bat za enkratno uporabo, 50 kos. (2.)			
245 916		1 komplet	68,90 €



1.



2.





Pisalo z izolirnim sredstvom za keramiko

Dvostransko pisalo je impregnirano s posebnim izolirnim mavcem za keramiko. S tanko konico lahko izolirno sredstvo naneseš selektivno, široka konica pa je idealna za večje površine.

Pisalo z izolirnim sredstvom za keramiko 1 kos **29,90 €**



Flow Fix

Tekoča žgalna pasta za fiksiranje najbolj občutljivih keramičnih izdelkov na nosilce obdelovancev in zatičke. Zaradi kremaste konsistence je mogoče restavracije zlahka povezati z materialom in po žganju odstraniti brez ostankov.

245 913 10 g 1 kos **19,90 €**



Gel za jedkanje keramike

5-% fluorovodikova kislina za jedkanje keramičnih izdelkov. Adhezijo med keramično površino in kompoziti za pritrjevanje je mogoče povečati z retencijskim vzorcem jedkanja. Optimalna konsistenca gela omogoča enostaven in natančen nanos.

000 989 Steklenička, 6 ml 1 stekl. **38,50 €**
3 stekleničke ali več na stekl. **37,50 €**



Ceramic-Sep

Odlično dolgotrajno sredstvo za ločevanje mavca od keramike. Tekočina gori brez ostankov in ne pušča barvnih sledi na keramiki.

245 914 20 ml 1 kos **20,50 €**



M+W select Denta-Don

Akrilat za vročo polimerizacijo za izdelavo delnih in polnih zobnih protez z metodo stiskanja ali vbrzganja. Posebej primerno za kratkotrajno polimerizacijo. Material odlikujejo odlične mehanske vrednosti in barvna obstojnost. Barva: rožnato prozorna.

500 901	Prah, 500 g	1 pak.	35,90 €
	2 pak. ali več	na pak.	34,50 €
500 905	Tekočina, 500 ml	1 stekl.	28,90 €
	2 pak. ali več	na pak.	27,50 €



M+W select Denta-Press

Akrilat za hladno polimerizacijo na osnovi metilmetakrilata z daljšim časom obdelovanja (7-8 min) za izdelavo protez z ulivanjem modelov, popravil, razširitev in podlaganje protez.

500 910	Prašek roza, 500 g	1 pak.	44,90 €
	2 pak. ali več	na pak.	43,50 €
500 912	Prašek prozoren, 500 g	1 pak.	44,90 €
	2 pak. ali več	na pak.	43,50 €
500 915	Tekočina, 500 ml	1 stekl.	39,90 €
	2 pak. ali več	na pak.	38,50 €



M+W select Denta-in-Press

Akrilat za hladno polimerizacijo na osnovi metilmetakrilata. Posebej prilagojeno za postopke brizganja. Odlično se obnese tudi pri običajnih tehnikah obdelave umetnih mas.

500 930	Prah, 500 g	1 pak.	48,90 €
	2 pak. ali več	na pak.	47,50 €
500 932	Tekočina, 500 ml	1 stekl.	46,50 €
	2 pak. ali več	na pak.	42,00 €



M+W select Denta-Fast-NF

Akrilat za hladno polimerizacijo za popravila za podaljševanje, ponovno pritrdjevanje zob in druga popravila. Razbarvanje je skorajda izključeno, vsebnost preostalih monomerov pa znižana. Barva: rožnato prozorna.

500 922	Prah, 500 g	1 pak.	41,90 €
	2 pak. ali več	na pak.	40,50 €
500 927	Tekočina, 500 ml	1 stekl.	31,90 €
	2 pak. ali več	na pak.	30,50 €



M+W select Poly-Pro

Majhna in robustna tlačna polimerizacijska enota za hladno in vročo polimerizacijo zobotehničnih umetnih mas.

Tehnični podatki:

Brezstopenjska regulacija temperature 55–120 °C

Napetost: 230 V/50 Hz

Moč: 200 W

Tlak: najv. 3,5 bara

Prostornina posode: 1,05 l


Dimenzije naprave (V x Š x G): 250 x 160 x 220 mm

Dimenzije lonca (Ø x V): 126 x 100 mm

Teža: 4 kg

Jamstvo: 1 leto

245 920 Poly Pro 1 pak. **1.188,00 €**

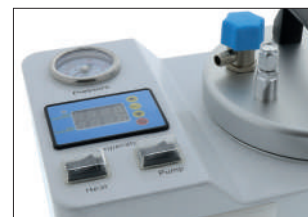

M+W select Streme za kivete V2A

Ta oblika stremena zagotavlja konstanten pritisk na kiveto med celotnim postopkom polimerizacije. S praktičnim držalom je mogoče streme po polimerizaciji varno odstraniti iz vrele vode. Primerno za kivete z največjo širino 105 mm.

198 902	Velikost 1	1 kos	71,90 €
198 903	Velikost 2	1 kos	73,90 €

M+W select MEDENINASTA KIVETA

081 939 90 x 90 x 60 mm 1 kos **83,90 €**





Pripomoček za podlaganje tipa I

Enostavna in natančna naprava za podlaganje protez z vijaki za hitro zapiranje. Vijaki in stebrički so izdelani iz medenine, plošče pa iz nerjavečega jekla.

000 959 (Ø x V) 115 x 100 mm 1 kos **55,00 €**



Pripomoček za podlaganje tipa II

Natančna naprava za podlaganje protez z deljenimi stebrički, ki so konično vodeni. Označevalni utori olajšajo vizualni pregled pri sestavljanju in preprečujejo povišanja ugriza. Vijaki za hitro vpenjanje v trenutku pritrdijo dele na mestu. Plošče iz nerjaveče kovine, stebrički in vijaki za hitro vpenjanje iz medenine. Barva: črna.

000 962 (Ø x V) 115 x 100 mm 1 kos **79,90 €**



Denta-O-Resin

Avtopolimerizat za izdelavo ortodontskih pripomočkov. Material se lahko vsestransko uporablja za tehnike brizganja, posipanja in gnetenja. Optimizirana kombinacija prahu in tekočine zagotavlja enostavno uporabo.

500 980 Prah, 500 g 1 pak. **52,90 €**

500 982 Tekočina, 500 ml 1 stekl. **30,90 €**



Micro-Isolat NF

Naše preizkušeno izolirno sredstvo na osnovi alginata z novo formulacijo. Primerno za hladne in vroče polimerizate. Dober oprijem na mavcu.

000 979 Steklenička z razpršilnikom, 100 ml 1 stekl. **7,20 €**

000 930 1 l 1 stekl. **13,20 €**



Chromavest

NOVO

Ena za vse! Naša univerzalna fosfatno vezana hitra vložna masa zadoštuje širokemu naboru potreb v zobozdravstvu. Vrhunsko izpopolnjena univerzalna tekočina omogoča ciljno usmerjen nadzor ekspanzije različnih aplikacij. Ena vložna masa za vse uporabe, samo ena tekočina, zelo natančna, lahko se uporablja konvencionalno ali v hitrem postopku.

094 980	30 x 150 g	1 pak.	59,90 €
094 981	Tekočina, 1 liter	na stekl.	18,20 €



Čopič za izolirno sredstvo

Bele kitajske ščetine, kratek lesen ročaj.

6 kos:

598 952	Velikost 10 (1.)	1 pak.	6,20 €
598 953	Velikost 12 (2.)	1 pak.	6,50 €
598 954	Velikost 14 (3.)	1 pak.	6,90 €



Zaključno razpršilo za proteze Plus

Ta izdelek se uporablja za odstranjevanje ostankov monomerov z zobnih protez in ima dodaten razkuževalni učinek. Izboljša vse protetične izdelke in jim daje prijeten svež okus. Pušča sijaj, kar dodatno poudari izdelavo. Prijeten okus po sveži meti na površini proteze pacientu že od samega začetka zagotavlja prijeten občutek pri nošenju. **Uporaba:** Razpršite na površino z razdalje 4 do 5 cm, pustite, da za kratek čas deluje, in nato obrišite ali spolirajte z mehko krpo.

000 923	Pločevinka z razpršilom, 75 ml	1 pločevinka	12,20 €
	10 pločevink ali več	na pločevinko	11,50 €



Igle za poliranje

Za čiščenje zobnih protez ali teleskopsko delo v vseh napravah za čiščenje zobnih protez. Dimenzije: 0,65 x 6 mm.

500 960	50 g	1 pak.	35,50 €
---------	------	--------	---------



Permabond Lab New Formula

Primer za kovine, ki je enostaven za uporabo. Treba ga je le nanesti in pustiti, da izhlapeva približno 1 minuto; svetlobna polimerizacija ni potrebna. Material brez vonja se lahko uporablja univerzalno za vse kovine in zagotavlja trajno vezavo.

500 950 5 ml 1 stekl. **59,90 €**



Attachment-Kleber NEM

Lepilo za polzila je dvokomponentno kompozitno lepilo zlate barve za pritrditev protetičnih pritrdilnih elementov iz neželeznih kovin. Kovinske dele lahko zato brez tenzije prilepite neposredno na delovni model. Visok delež anorganskih polnil zagotavlja visoko končno trdoto in s tem potrebno stabilnost.

2 x 2,5 g dvojna brizga,

074 924 vključno s 5 mešalnimi kanilami 1 pak. **44,90 €**

074 922 Mešalna kanila rjava, 10 kos 1 pak. **7,30 €**



Attachment-Kleber Zirconia

Attachment-Kleber Zirconia je prosojen, samostrjujoč kompozit za adhezivno pritrjevanje konstrukcij iz cirkonijevega oksida na restavracije iz plemenitih in neplemenitih kovin ter keramike. Lepilo ima odličen oprijem in je preprosto za uporabo zahvaljujoč mešalnim kanilam, v katerih je material pripravljen za uporabo. Strjevanje s svetlobo ni potrebno. Attachment Zirconia Primer je posebej oblikovano sredstvo za lepljenje na osnovi etanola, ki zagotavlja trajno in varno vezavo.

2 x 4 g dvojna brizga,

074 917 5 mešalnih kanil 1 pak. **67,90 €**

074 922 Mešalna kanila rjava, 10 kos 1 pak. **7,30 €**



M+W select Artikulacijski papir 200μ

Za grobo okluzijsko testiranje pri nameščanju kron, mostičkov in protez. Praktična dozirna škatlica omogoča enostavno rokovanje s trakovi.

Dozirna škatlica s 300 lističi:

300 900	modra	1 pak.	13,95 €
300 901	rdeča	1 pak.	13,95 €
	5 ali več pakiranj ene barve	na pak.	13,65 €



M+W select Okluzijsko razpršilo Plus

Natančno doziranje zaradi precizne kovinske razpršilne cevke in posebnega ventila. Pigmentni sloj se lahko gradi v plasteh in označuje od 7 do 10 μm. Zelo drobnnozrnat. Z lahkoto ga odstranite z vodo. Vrhunsko okluzijsko razpršilo s potisnim plinom, ki ne škoduje ozonskemu plašču. Zelena barva.

	75 ml pločevinka + kovinska razpršilna cevka	1 pločevinka	13,50 €
000 951	5 pločevink ali več	na pločevinko	12,50 €



M+W select Okluzijsko razpršilo LAB

Visokakovostno laboratorijsko okluzijsko razpršilo s precizno razpršilno cevko za natančno označevanje. Brez freonov, s potisnim plinom, ki ne škoduje ozonskemu plašču. Posebej fini in mat barvni sloj (velikost zrn 5-7 μm). Brez voska in topil. Očistiti je mogoče tudi suhe modele. Popolnoma neškodljiv s toksikološkega vidika. Zadostuje za približno 600 aplikacij.

094 990	zelena	1 pločevinka	9,50 €
094 991	rdeča	1 pločevinka	9,50 €
	10 pločevink ali več ene barve	na pločevinko	8,90 €



M+W select Artikulacijski papir 40μ

Za rutinske kontrole in fina okluzijska testiranja, 22 x 110 mm.

10 pakiranj po 12 trakov:

300 902	modra	1 pak.	9,20 €
300 903	rdeča	1 pak.	9,20 €
	3 ali več pakiranj ene barve	na pak.	8,90 €



M+W select Okluzijsko razpršilo

Brez freonov, s potisnim plinom, ki ne škoduje ozonskemu plašču. Posebej fin, barvno intenziven sloj. Brez voska in topil. Očistiti je mogoče tudi suhe modele. Popolnoma neškodljiv s toksikološkega vidika. Zadostuje za približno 600 aplikacij.

	75 ml		
000 990	zelena	1 pločevinka	9,60 €
000 991	rdeča	1 pločevinka	9,60 €
	10 pločevink ali več ene barve	na pločevinko	8,99 €





Red Milling Cutter

M+W Select Milling Cutter so posebne freze z rdečo prevleko, ki imajo v primerjavi z običajnimi frezami nadpovprečno dolgo življenjsko dobo. Njihove izjemne površinske lastnosti omogočajo izjemno hladno delo. To pozitivno vpliva na obdelovani material. Zaradi različnih tipov nazobčanja so primerne za vsa železna področja uporabe in zagotavljajo največjo natančnost tudi pri uporabi zahtevnih materialov.

Rdeč obroček: Fino križno nazobčanje, idealno za kovinske zlitine in umetne mase za proteze.

Moder obroček: Vsestranski pripomoček za mavce (tudi vlažne) in umetne mase za proteze.

Roza obroček: Za grobo obdelavo titanovih zlitin, kovinskih zlitin in keramik za fasetiranje.

Črn/zelen obroček: Primeren za mehke umetne mase in umetne mase za proteze.

Zelen/oranžen/rumen obroček: Za končno obdelavo kovinskih zlitin, odlitkov modelov in titanovih zlitin pred gumiranjem.

Rdeč obroček (1 kos)

									
Oblika 1	Oblika 3	Oblika 5	Oblika 6	Oblika 7	Oblika 8	Oblika 9	Oblika 10	Oblika 12	Oblika 13
144 920	144 922	144 924	144 925	144 926	144 927	144 928	144 929	144 931	144 932
17,50 €	29,00 €	17,50 €	17,50 €	29,00 €	17,50 €	29,00 €	17,50 €	17,50 €	29,00 €

Moder obroček (1 kos)

							
Oblika 17	Oblika 18	Oblika 19	Oblika 20	Oblika 21	Oblika 22	Oblika 23	Oblika 26
144 936	144 937	144 938	144 939	144 940	144 941	144 942	144 945
27,00 €	27,00 €	22,00 €	17,50 €	27,00 €	27,00 €	18,50 €	29,00 €

Roza obroček (1 kos)

								
Oblika 27	Oblika 29	Oblika 31	Oblika 32	Oblika 33	Oblika 34	Oblika 35	Oblika 36	Oblika 39
144 946	144 948	144 950	144 951	144 952	144 953	144 954	144 955	144 958
23,00 €	29,90 €	23,00 €	29,90 €	22,00 €	23,00 €	29,90 €	23,00 €	23,00 €

Oranžen/zelen/rumen obroček (1 kos)

			
Oblika 41	Oblika 42	Oblika 43	Oblika 44
144 960	144 961	144 962	144 963
29,90 €	23,00 €	23,00 €	23,00 €

Črn/zelen obroček (1 kos)

		
Oblika 48	Oblika 49	Oblika 50
144 967	144 968	144 969
27,00 €	29,90 €	27,00 €

M+W select Karbidne freze

Za ročnik, Ø držala 2,35 mm.

KARBIDNA FREZA KUSTA - UMETNE MASE POSEBNA


Za agresivno odstranjevanje materiala, za vse vrste umetnih mas, vključno z materialom za žlice in mavcem. Zelen obroček.

							
Kusta 40	Kusta 41	Kusta 42	Kusta 43	Kusta 44	Kusta 45	Kusta 46	Kusta 47
107 805	107 806	107 807	107 808	107 809	107 810	107 811	107 812
1 kos	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €	20,50 €

KARBIDNA FREZA MAKRO - KRIŽNO NAZOBČANJE


Primerno za grobo odstranjevanje vseh materialov. Za odstranjevanje materiala z večjih površin brez natrganja. Svetlo moder obroček.

												
Macro 5	Macro 6	Macro 7	Macro 8	Macro 9	Macro 10	Macro 11	Macro 12	Macro 13	Macro 14	Macro 15	Macro 16	Macro 17
107 801	107 802	107 859	107 860	107 861	107 862	107 840	107 841	107 842	107 843	107 844	107 845	107 846
1 kos	17,50 €	17,50 €	17,50 €	17,50 €	17,50 €	17,50 €	12,10 €	17,50 €	12,10 €	12,10 €	12,10 €	12,10 €

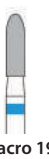									
Macro 18	Macro 19	Macro 20	Macro 21	Macro 22	Macro 23	Macro 24	Macro 25	Macro 26	Macro 27
107 847	107 849	107 850	107 851	107 852	107 853	107 854	107 855	107 856	107 857
1 kos	11,20 €	11,20 €	11,20 €	11,20 €	8,40 €	11,20 €	11,20 €	17,50 €	17,50 €

KARBIDNA FREZA MICRO KRIŽNO NAZOBČANJE FINA

Za obdelavo plemenitih in neželeznih kovin ter keramike. Zgladi površino in omogoča ciljno obdelavo vseh struktur. Rdeč obroček.

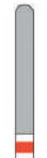												
Micro 21	Micro 22	Micro 23	Micro 24	Micro 25	Micro 26	Micro 27	Micro 28	Micro 29	Micro 30	Micro 31	Micro 32	Micro 33
007 847	007 848	007 849	007 850	007 851	007 852	007 853	007 840	007 841	007 842	007 843	007 844	007 845
1 kos	16,50 €	21,90 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	15,50 €	21,90 €	15,50 €	15,50 €	15,50 €	15,50 €	15,50 €

					
Micro 34	Micro 35	Micro 36	Micro 37	Micro 38	Micro 39
007 846	007 827	007 859	007 860	007 861	007 862
1 kos	15,50 €	21,90 €	21,90 €	21,90 €	21,90 €

KARBIDNA FREZA MILLI-MICRO - KRIŽNO NAZOBČANJE SUPER FINA

Za zelo fino obdelavo plemenitih in neželeznih kovin, idealna tudi za keramiko, saj posebno brušenje rez preprečuje nastanek razpok. Rumen obroček.

								
Milli-Micro 31	Milli-Micro 32	Milli-Micro 33	Milli-Micro 34	Milli-Micro 35	Milli-Micro 36	Milli-Micro 37	Milli-Micro 38	Milli-Micro 39
007 854	007 855	007 856	007 857	007 858	107 815	107 816	107 817	107 818
1 kos	17,50 €	17,50 €	17,50 €	17,50 €	22,30 €	17,50 €	17,50 €	15,50 €

KARBIDNA FREZA PLAIN - ENOJNO NAZOBČANJE SUPER FINA

Za odstranjevanje zlata in drugih zlitin plemenitih kovin ter umetnih mas. Posebej primerna za oblikovanje papil zobnih protez. Rumen obroček.

					
Plain 51	Plain 52	Plain 54	Plain 55	Plain 56	Plain 57
007 863	007 864	007 866	007 867	007 868	007 869
1 kos	11,20 €	11,20 €	11,20 €	8,70 €	15,50 €

KARBIDNA FREZA SPIRALNO NAZOBČANJE - SUPER FINA

Za obdelavo neželeznih kovin, titana, plemenitih kovin, ulitij modelov in trdega mavca, zahtevnih za obdelavo.

					
Spiral 61	Spiral 62	Spiral 63	Spiral 64	Spiral 65	
207 850	207 851	207 852	207 853	207 654	
1 kos	15.80 €	15.80 €	15.80 €	20.40 €	20.40 €

KARBIDNA FREZA NAZOBČANJE IZ TITANA - GROBA

Za obdelavo materialov, zahtevnih za obdelavo, kot je titan.

			
Titan 71	Titan 72	Titan 73	Titan 75
207 844	207 845	207 846	207 848
1 kos	15,50 €	15,50 €	20,40 €

KARBIDNA FREZA NAZOBČANJE IZ TITANA - FINA

Za fino, a učinkovito odstranjevanje materialov, zahtevnih za obdelavo, kot so neplemenite kovine ali titanove zlitine.

						
Titan 76	Titan 77	Titan 78	Titan 79	Titan 80	Titan 81	Titan 82
207 855	207 856	207 857	207 858	207 859	207 872	207 873
1 kos	15,50 €	15,50 €	15,50 €	20,40 €	17,50 €	15,80 €

KARBIDNA FREZA TURBO-CUTTER ZA MAVEC - FINA

Zelo mehko in brez drobcov zbrusi trd in zelo trd mavec, materiale za modeliranje in umetne mase ter učinkovito odstrani material. Iz karbida. Dobavljivo za ročnik, Ø držala 2,35 mm.

		
	ISO 060	ISO 070
	007 898	007 899
1 kos	20,90 €	20,90 €

KARBIDNA FREZA TURBO-CUTTER ZA MAVEC - GROBA

Karbida freza z varnostnim nazobčanjem. Tako imenovano fazno brušenje zagotavlja učinkovito odstranjevanje materiala ter gladke in čiste površine. Deluje zelo tiho in se ne zatika. Zaradi vrtenja v nasprotni smeri urnega kazalca se freza tudi pri visokem delovnem pritisku ne more premakniti iz vpenjalne sponke. Zaradi širokih brazd za odvajanje odrezkov ne prihaja do nabiranja materiala.

			
	ISO 060	ISO 061	ISO 070
	007 891	007 893	007 896
1 kos	23,40 €	23,40 €	23,40 €






Laboratorijski diamantni brusilniki

Izdelani v skladu z najnovejšimi visokotehnološkimi proizvodnimi postopki in najstrožjimi standardi kakovosti. Z držalom za ročnik Ø 2,35 mm.

Prednosti:

- Za čiste in gladke površine
- Tek brez vibracij (odstopanja manj kot 1/100 mm)
- M = srednje, za brušenje in glajenje (110–120 µm)
- Izjemno trpežni zaradi enakomerne galvanizacijske vdelave diamantov konstantne velikosti
- Univerzalna uporaba, ki prihrani pogoste menjave instrumentov

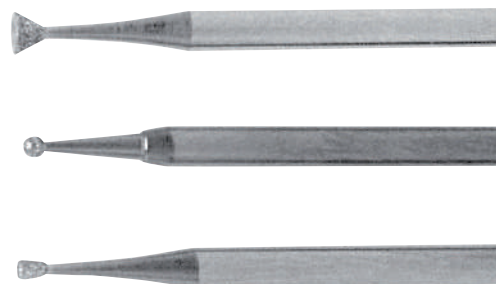

Slika												
Velikost ISO	012	014	016	018	021	023	029	035	012	014	016	018
Dolžina	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	1,5	1,5
M	012	014	016	018	021	023	029	035	012	014	016	018
Št. art.	400 901	400 902	400 903	400 904	400 905	400 906	400 907	400 908	400 909	400 910	400 911	400 912
1 kos	2,99 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €	3,80 €	3,80 €	5,80 €	5,80 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €

Slika												
Velikost ISO	021	023	016	018	023	025	050	025	050	025	018	018
Dolžina	2,0	2,0	4,0	5,0	6,0	1,5	2,0	0,9	1,5	6,0	7,0	8,0
M	021	023	016	018	023	025	050	025	050	025	018	018
Št. art.	400 913	400 914	400 915	400 916	400 917	400 920	400 952	400 924	400 925	400 954	400 927	400 928
1 kos	2,99 €	3,80 €	2,99 €	2,99 €	4,20 €	4,80 €	9,99 €	3,40 €	9,99 €	5,20 €	5,20 €	5,20 €

Slika												
Velikost ISO	033	025	018	040	009	014	025	010	033	040	018	014
Dolžina	8,0	7,0	10,0	9,0	4,0	10,0	10,0	4,0	9,0	9,0	10,0	6,0
M	033	025	018	040	009	014	025	010	033	040	018	014
Št. art.	400 931	400 934	400 936	400 955	400 958	400 959	400 960	400 943	400 956	400 957	400 947	400 948
1 kos	6,90 €	5,20 €	5,80 €	10,50 €	2,99 €	5,80 €	6,80 €	2,99 €	9,99 €	10,50 €	5,80 €	3,40 €



Diamantne separirke Superflex


Brez vretena, obojestransko rezanje na robu.

Ø 19 mm:

046 880	oboještanski, debelina 0,23 mm	1 kos	9,95 €
046 881	enoštanski, debelina 0,145 mm	1 kos	9,95 €

Ø 22 mm:

046 883	oboještanski, debelina 0,23 mm	1 kos	10,95 €
046 884	enoštanski, debelina 0,145 mm	1 kos	10,95 €

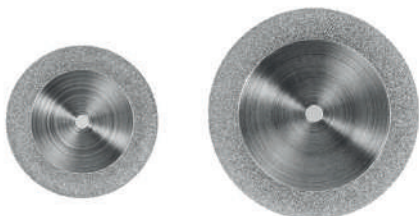

Superflex Nr. 350

Perforiran disk, debeline 0,25 mm, standardna granulacija 100 µm. Obojestransko prevlečen, z vretenom.

300 960	Ø 19 mm (350/190)	1 kos	21,20 €
300 961	Ø 22 mm (350/220)	1 kos	22,20 €



Superflex Nr. 355

Izjemno tanek diamantni disk, debeline 0,25 mm, standardna granulacija 100 µm. Obojestransko prevlečen, z vretenom.

300 962	Ø 19 mm (355/190)	1 kos	15,10 €
300 963	Ø 22 mm (355/220)	1 kos	16,10 €



Superflex Nr. 705

Poševno nazobčan, izjemno fleksibilen diamantni disk. Debelina 0,15 mm, obojestranska granulacija 50 µm, z vretenom.

300 965	Ø 19 mm (705/190)	1 kos	21,20 €
300 966	Ø 22 mm (705/220)	1 kos	22,20 €



Dia-Tec

NOVO

Idealno za odstranjevanje materiala in oblikovanje keramike in zelo trdnih materialov, kot je cirkonijev oksid. Obdelovati je mogoče celo kovine. Posebna vez zmanjšuje nastanek toplote in tako preprečuje tveganje mikrorazpok. Naši diamantni polimiki M+W Select Kera-Pro so idealni za naknadno poliranje. Ø držala 2,35 mm.

- Izjemno učinkovito odstranjevanje materiala
- Zelo dolga življenjska doba
- Zmanjšano nastajanje toplote
- Večja stabilnost robov
- Stabilna vez z diamantnimi zrnji
- Dimenzije (Ø x V): stožec 4,0 x 10 mm, kolut: 15 x 3,0 mm

800 917	Stožec grobi	1 kos	9,90 €
800 918	Stožec srednji	1 kos	9,90 €
800 919	Kolut grobi	1 kos	22,50 €
800 920	Kolut srednji	1 kos	22,50 €



Kera-Pro

NOVO

Naš tristopenjski diamantni sistem za poliranje omogoča vrhunsko obdelavo in poliranje materialov, kot so cirkonijev oksid, keramika, litijev disilikat, titan in druge kovine, v nekaj sekundah. Sistem odlikuje kratek čas obdelave, pri kateri polirna pasta ni potrebna. Naši brusilniki M+W Select Dia-Tec so idealni za oblikovanje in odstranjevanje materialov. Ø držala 2,35 mm.

- Hitri popravki površine brez dodatnega žganja z glazuro
- Diamantna granulacija za največjo učinkovitost
- Odstranjevanje, glajenje in poliranje do visokega sijaja
- Zmogljivi in odporni na obrabo
- Dimenzije (Ø x V): Plamen 4,0 x 13 mm, kolut 11 x 2,0 mm, twist: 17 x 1,6 mm, leča: 26 x 2,0 mm

800 905	Plamen fino	1 kos	8,40 €
800 906	Plamen grobo	1 kos	8,40 €
800 907	Plamen srednje	1 kos	8,40 €
800 908	Kolut fino	1 kos	8,40 €
800 909	Kolut grobi	1 kos	8,40 €
800 910	Kolut srednji	1 kos	8,40 €
800 911	Twist fino	1 kos	14,90 €
800 912	Twist grobo	1 kos	14,90 €
800 913	Twist srednje	1 kos	14,90 €
800 914	Leča fino	1 kos	33,90 €
800 915	Leča grobo	1 kos	33,90 €
800 916	Leča srednje	1 kos	33,90 €





Superflex Nr. 605

Disk z režami, ki zagotavljajo dodaten hladilni učinek. Debelina 0,25 mm, standardna granulacija 100 µm, obojestransko prevlečen, z vretenom.

300 964 Ø 22 mm (605/220) 1 kos **18,80 €**



Ultraflex Nr. 396

Diamantni disk z ukrivljeno perforacijo za separacijo in konturiranje keramike. Visoka fleksibilnost in dobra preglednost preprečujeta brusne fasete. Debelina 0,15 mm z granulacijo 50 µm. Z vretenom.


300 969 Ø 22 mm 1 kos **18,80 €**



Superflex Nr. 393

Diski z ovalno perforacijo za separacijo in konturiranje keramike. Gladko delovanje in učinkovito odstranjevanje materiala. Izjemna fleksibilnost in pregledno delo. Debelina 0,15 mm, granulacija 50 µm, obojestransko prevlečen, z vretenom.


300 967 Ø 22 mm (393/220) 1 kos **18,80 €**

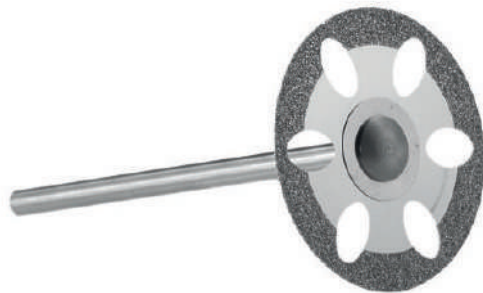

Ultraflex Nr. 366

Izjemno tanek diamantni disk za separacijo in konturiranje keramičnih fasetiranj in fasetiranj iz umetnih mas. Debelina le 0,09 mm. Zelo fina granulacija (30 µm). Obojestranska obloga. Z vretenom.

300 968 Ø 22 mm (366/220) 1 kos **23,90 €**

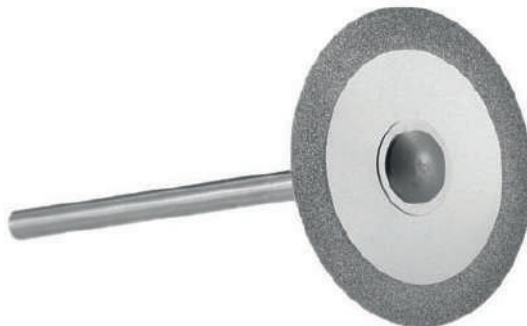

Vložek za vpenjalne klešče

Vložek za zmanjšanje premera vpetja za večkratno uporabo.

074 835 Ø 2,35 mm na Ø 1,6 mm 1 kos **4,50 €**

074 836 Ø 3,00 mm na Ø 2,35 mm 1 kos **4,50 €**





Brusni papir/platno

Prožna papirnata ali platnena podlaga z enakomerno granulacijo, odporna na obrabo, zagotavlja dobro prilagajanje krivuljam in konturam ter s tem enakomerno brušenje in poliranje. Zvitki so dobavljeni v praktičnih kartonastih dozirnikih, ki jih je mogoče z jezički na zgornji in spodnji strani sestaviti v poljuben komplet.

Brusni papir, zvitek po 50 m:

093 941	Granulacija 80	1 zvitek	15,90 €
093 942	Granulacija 100	1 zvitek	15,90 €
093 943	Granulacija 120	1 zvitek	15,90 €
093 944	Granulacija 150	1 zvitek	15,90 €
093 945	Granulacija 180	1 zvitek	15,90 €
093 946	Granulacija 220	1 zvitek	17,90 €
093 947	Granulacija 400	1 zvitek	19,90 €
093 948	Granulacija 600	1 zvitek	19,90 €
093 949	Granulacija 800	1 zvitek	19,90 €

Brusno platno, zvitek po 50 m:


193 901	Granulacija 100	1 zvitek	20,20 €
193 902	Granulacija 120	1 zvitek	20,20 €
193 903	Granulacija 150	1 zvitek	20,20 €
193 904	Granulacija 180	1 zvitek	20,20 €
193 905	Granulacija 220	1 zvitek	24,90 €
193 906	Granulacija 400	1 zvitek	24,90 €



Separirni diski

za kobalt-kromove zlitine za
brušenje in separacijo:

018 804	22 x 0,60 mm, 100 kos.	1 pak.	15,50 €
018 802	35 x 3,00 mm, 25 kos.	1 pak.	21,90 €

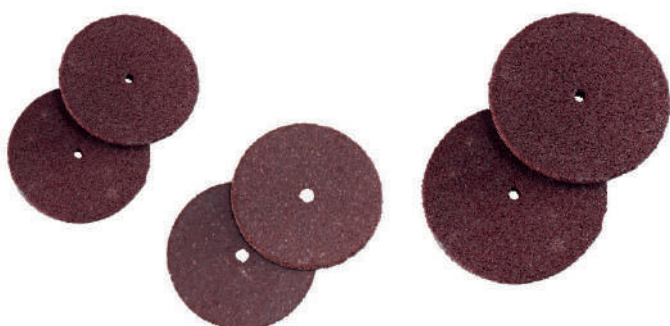

Separirni diski

Za separirne diske, ojačane s tkanino, sta značilni zelo visoka stabilnost in upogibna trdnost. Separirni diski so na voljo za široko paleto aplikacij in ponujajo odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

Keramika in cirkonij, 20 kos:

069 815	20 x 0,2 mm	1 pak.	74,90 €
069 816	20 x 0,3 mm	1 pak.	74,90 €
069 817	26 x 0,4 mm	1 pak.	31,50 €

Titan in umetne mase, 20 kos:

069 818	40 x 0,6 mm	1 pak.	43,50 €
---------	-------------	--------	---------

Neželezne kovine in plemenite kovine, 20 kos:

069 805	22 x 0,2 mm	1 pak.	27,90 €
069 806	22 x 0,3 mm	1 pak.	23,90 €
069 819	26 x 0,3 mm	1 pak.	32,90 €

Neželezne kovine in ulivanje modelov, 20 kos:

069 820	22 x 1,0 mm (HARD)	1 pak.	29,90 €
069 807	40 x 0,5 mm	1 pak.	46,90 €
069 808	40 x 1,0 mm	1 pak.	46,90 €
069 821	40 x 1,0 mm (HARD)	1 pak.	49,95 €



Premium Flex

Univerzalni vrhunski brusilni diski za obdelavo kompozitov, kovin in drugih umetnih mas ter celo keramike. Brusni material z gostimi abrazivnimi zrni večkratno podaljša življenjsko dobo.

- Visokokakovostni slojni najlonski nosilni material
- Al₂O₃ prevleka, enostransko
- Mandrela Snap-On
- Mohsova trdota 5,5
- Ø 22 mm (7/8)

25 kos:

074 822	fino, 40 µm	1 pak.	11,90 €
074 823	srednje, 60 µm	1 pak.	11,90 €
074 824	grobo, 100 µm	1 pak.	11,90 €





Posebna ščetka št. 70

Za hitro poliranje ogradij za ulivanje
modelov. Zelo trde, kratke in gosto nasajene
ščetine, ovoj iz umetne mase z lesenim jedrom.

045 864 Ø 70 mm, 10 kos. 1 pak. **28,90 €**



Laboratorijska ščetka 4/80

Jedro iz umetne mase, 4-vrstna, črna, Ø 80 mm.

10 kos:

045 865	koničast	1 pak.	39,90 €
045 866	široko	1 pak.	39,90 €



Okrogle ščetke

Jedro iz umetne mase, črna.

10 kos:

045 850	2-vrstna, Ø 50 mm	1 pak.	15,90 €
045 851	3-vrstna, Ø 63 mm	1 pak.	21,90 €



Ozka ščetka 15 LK

Ø 49 mm, 10 kos.:

045 802	s kovinskim sredinskim delom	1 pak.	28,90 €
045 868	z jedrom iz umetne mase	1 pak.	28,90 €





Ščetka iz kozje dlake 48 ZK

Ø 49 mm.


045 869	z jedrom iz umetne mase, 10 kos.	1 pak.	29,90 €
045 852	s kovinskim sredinskim delom, 10 kos.	1 pak.	29,90 €



Kombinirana ščetka

5-vrstna, s tkaninastim vložkom. Zadržuje vlago, zato je poliranje hladno in hitro. Ščetka ima dolgo življenjsko dobo. Z jedrom iz umetne mase.

074 817	Ø 65 mm	1 kos	4,90 €
074 805	Ø 80 mm	1 kos	5,50 €

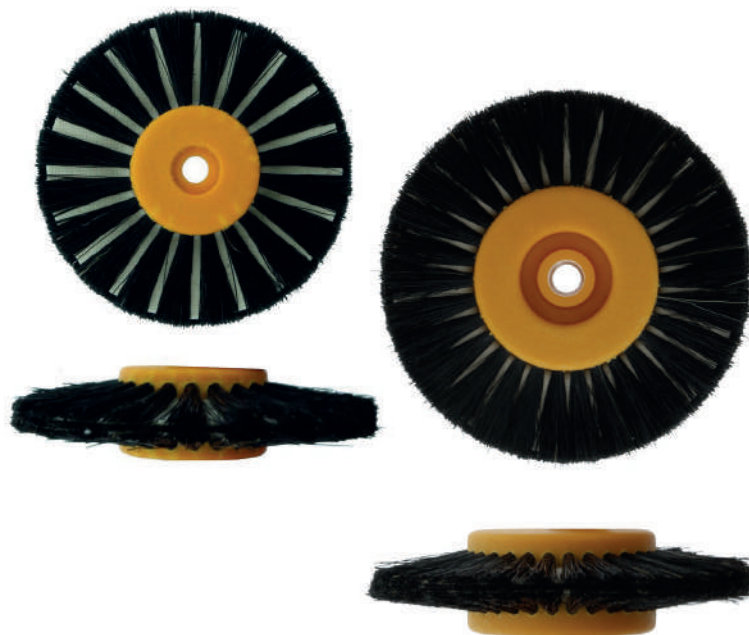

Ščetka iz flisa

Struktura vlaken z odprtimi porami absorbira več plovca ali polirne paste kot običajne ščetke. Flis absorbira več zraka, zato je poliranje hladnejše in nežnejše do umetne mase. S tem se preprečijo poškodbe površine.

074 802	Ø 55 mm	1 kos	4,50 €
	od 10 kos.	na kos	4,20 €



Polirna ščetka št. 50

Enovrstna polirna ščetka za poliranje protez iz umetne mase. Ø 45 mm, jedro iz umetne mase.

045 871	10 kos	1 pak.	15,90 €
----------------	--------	--------	----------------





Polirna ščetka

Plisirana ščetka: za poliranje plemenitih in neželeznih kovin do visokega sijaja, Ø 85 mm, roza.

Ortodontska plisirana ščetka: univerzalna, Ø 100 mm, tkanina bela.

Fina plisirana ščetka: za poliranje plastike in kovine do visokega sijaja. Jedro iz umetne mase Ø 100 x 8 mm in Ø 65 x 8 mm z majhnim jedrom za področje neba.

Flanelna ščetka: zelo mehka, za poliranje plastike do visokega sijaja. Jedro iz umetne mase Ø 100 x 8 mm in Ø 65 x 8 mm z majhnim jedrom za področje neba.

074 810	Plisirana ščetka št. 812	1 kos	7,90 €
074 811	Ortodontska plisirana ščetka št. 814	1 kos	7,50 €
	od 10 kos.	na kos	7,00 €
074 826	Fina plisirana ščetka 65	1 kos	4,10 €
074 827	Fina plisirana ščetka 100	1 kos	5,80 €
074 828	Flanelna ščetka 65	1 kos	4,10 €
074 829	Flanelna ščetka 100	1 kos	4,80 €




Mikro polirna ščetka Pro

Gumirana polirna ščetka iz čistega bombaža. Do 3-krat daljša življenjska doba. Ne pušča vlaken in se ne mucka.

Soft: Za poliranje umetnih mas in drugih trdih materialov do visokega sijaja

Hard: Za predhodno poliranje s plovcem v prahu. Ø 100 x 8 mm.

074 813	Soft	1 kos	9,50 €
074 814	Hard	1 kos	9,50 €

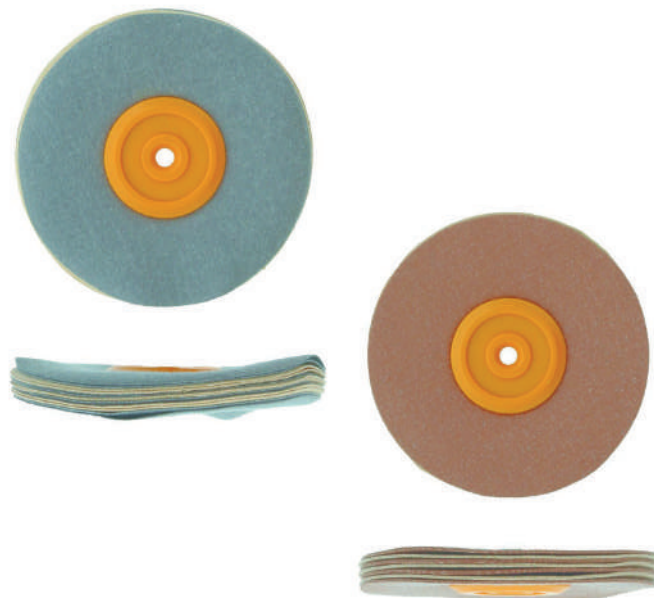

Ščetka za poliranje neba

Za polirni motor. Primerna za poliranje predelov neba ali težko dostopnih mest.

074 815	Ščetine, Ø 25 mm	1 kos	12,20 €
074 816	Kozje ščetine, Ø 25 mm	1 kos	14,20 €



Volnena okrogla ščetka

Za poliranje do visokega sijaja s polirnim motorjem, širine 30 mm.

010 924	Ø 70 mm	1 kos	13,90 €
----------------	---------	-------	----------------





Ščetke za čiščenje zob


Z visokokakovostnimi ščetinami Chungking ali kozjimi ščetinami. Za kovinske površine in površine iz umetnih mas.

brez vretena, 12 kos.:

045 853	Ščetine črne, Ø 19 mm	1 pak.	12,90 €
045 854	Ščetine črne, Ø 21 mm	1 pak.	12,90 €
045 855	Ščetine bele, Ø 19 mm	1 pak.	13,90 €
045 856	Kozje ščetine, Ø 19 mm	1 pak.	11,90 €
045 857	Kozje ščetine, Ø 21 mm	1 pak.	11,90 €

z vretenom, 12 kos.:

045 858	Ščetine črne, Ø 19 mm	1 pak.	15,90 €
045 859	Ščetine črne, Ø 21 mm	1 pak.	15,90 €
045 860	Kozje ščetine, Ø 19 mm	1 pak.	12,90 €
045 861	Kozje ščetine, Ø 21 mm	1 pak.	12,90 €

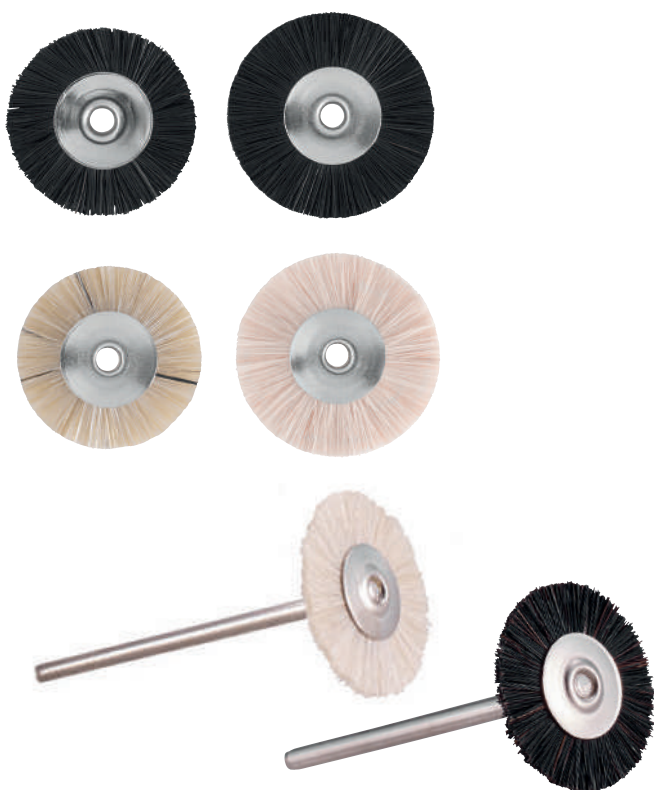

Žičnate ščetke

Ščetke gladijo, zgoščajo in polirajo brez drgnjenja. Izdelki iz zlata in jekla dobijo bogat sijaj.

Ø 21 mm, 10 kos.:

045 862	brez vretena	1 pak.	16,50 €
045 863	z vretenom	1 pak.	19,90 €



Magnetno stojalo

Vrtljivo magnetno stojalo, na katerega je mogoče odložiti veliko število nastavkov. Barva: siva.

000 964	(V x Ø) 100 x 115 mm	1 kos	49,90 €
---------	----------------------	-------	---------



Stojalo za freze

Zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje frez, polirnikov, separirnih diskov in drugih orodij z držalom 2,35 mm. Zaradi magnetne sprednje strani je mogoče zlahka pritrditi tudi freze z držalom 1,6 mm. Z nedrsečo gumijasto podlago. Dimenzije (V x Š x G): 6,4 x 14 x 7,6 cm.

998 808	bela	1 kos	21,90 €
998 809	modra	1 kos	21,90 €





Polirne paste

Ploščica 350 g:

181 901	bela, za predhodno poliranje plemenitih kovin	1 pak.	10,90 €
181 903	rumena, za predhodno poliranje odlitkov modelov	1 pak.	15,20 €
181 904	zelena, za poliranje odlitkov modelov do sijaja	1 pak.	15,20 €
181 905	roza, za predhodno poliranje umetnih mas	1 pak.	15,20 €
181 902	rdeča (pariško rdeča) za poliranje plemenitih kovin do sijaja	1 pak.	18,50 €
181 906	bež, za poliranje umetnih mas do sijaja	1 pak.	15,20 €

Ploščica 400 g:

181 907	Diamantna polirna pasta roza, vsebuje diamantni prah za izjemen sijaj keramike, raznih jeklenih izdelkov in umetnih mas	1 pak.	47,90 €
----------------	---	--------	----------------



Pištola za stisnjen zrak

Iz umetne mase, z aluminijasto podaljševalno cevjo. Idealna za odstranjevanje odtisov z modela ali povsod, kjer je potreben zrak pod pritiskom. Z zanko za obešanje. Priključek Ø 6 mm.

099 907 Pištola za stisnjen zrak 1 kos **21,90 €**



Šoba za stisnjen zrak

Za sušenje modelov, odtisov, kivet itd.

169 918 s 6-mm priključnim tulcem 1 kos **18,90 €**



Diamantna polirna pasta

V vodi topno diamantno polirno sredstvo z visokokakovostnimi naravnimi diamanti z enakomerno velikostjo zrn 2 µm za poliranje keramike, plemenitih kovin in neželeznih zlitin do visokega sijaja. Dozirna konica omogoča zelo varčno porabo.

081 990 Brizga s 5 g 1 kos **24,50 €**



Škatla za brušenje

Majhna škatla za brušenje iz umetne mase. Primerna je zlasti za manjša dela (dokončanje začasnih restavracij, izravnavo mest na protezah, ki tiščijo, itd.), pri katerih odsesavanje ni potrebno. Odstranljivo dno omogoča enostavno praznjenje.

Dimenzije (D x Š): 290 x 205 mm,
098 906 V 115 mm spredaj, 175 mm zadaj 1 kos **119,00 €**



Diazirgloss

Visokozmogljiva in abrazivna diamantna polirna pasta za predhodno poliranje in poliranje cirkonijskega oksida, kompozitov, zobne keramike in zlitin neželeznih kovin do visokega sijaja.

181 910 40 g 1 pločevinka **79,90 €**



M+W select K-60 Master

Visoko zmogljiv mikromotor za vsakodnevno laboratorijsko delo. Zaradi ergonomsko oblikovanega ročnika je teža dobro razporejena, kar zagotavlja delo brez utrujenosti. Uporaba kot kolenska ali namizna različica, samodejni tek, nastavljivo št. vrtljajev od 1000 do 60.000 vrt/min, vrtenje v smeri urinega kazalca in obratno, brezkrtačni in lahki ročnik, nizke vibracije, visokokakovostni kroglični ležaji, največji navor 16 Ncm, hitri vpenjalnik, enostavno servisiranje (preprosta menjava ležajev).

Tehnični podatki:

Napetost: 230 V/60 Hz

Moč: 230 W

Navor: 16 Ncm

Št. vrtljajev: 1.000–60.000 vrt/min,

Dimenzije krmilne enote (D x Š x V): 263 x 96 x 230 mm

Dimenzije ročnika (Ø x D): 25 x 162 mm

Teža krmilne enote: 2,6 kg

Teža ročnika: 0,36 kg

Jamstvo: 1 leto

Krmilna enota (koleno),
ročnik s kablom,

094 952 nožno stikalo, držalo za ročnik 1 kos **999,00 €***

* Neto cena, brez možnosti dodatnih popustov.



M+W select Filtrirna vrečka

Filtrirne vrečke ustrezajo razredu prahu M in so posebej primerne za odstranjevanje nevarnih onesnaževal, kot so mavec, plemenite kovine in keramika. Zmanjšujejo obremenitev pljuč z drobnim prahom. Ti visokokakovostni ultrafini filtri z vgrajenim predhodnim filtrom so na voljo za sesalne sisteme proizvajalcev KaVo, Freuding, Harnisch&Rieth, Wassermann in Zubler. Izdelani so v skladu z najnovejšimi zahtevami za zagotavljanje kakovosti in ustrezajo standardu EN 60335-2-69.



Proizvajalec	Enota za sesanje/poliranje	Vrsta filtra	Št. art.	Enota	na pak.
KaVo	Smart air, -mobile in EWL	Filtrirna vrečka	193 920	5 kos.	52,50 €
	Škatla za poliranje EWL	Filtrirna vrečka	193 921	2 kos.	22,90 €
	Smart air, -mobile in EWL	Fini filter	193 922	1 kos	86,90 €
	ABSORMatic, EXTRAMatic 760	Filter ABSORBA z dolgo živ. dobo	193 923	1 kos	189,00 €
Freuding	AM, AE, A84 in AT	Filtrirna vrečka	193 930	3 kos.	28,90 €
	A40, A40 Variteam	Filtrirna vrečka	193 931	1 kos	15,90 €
	A40, A40 Variteam, AM/2, AE/2 in AG/2	Fini filter	193 932	1 kos	58,90 €
Harnisch & Rieth	D-LE 260, D-LE 255+S/D, D-TA 50+52, PG 360+400, D-G 14+16 in-H 225	Papirnata filter vrečka	193 935	1 kos	20,80 €
	D-LE 260, D-LE 255, D-TA 50+52, PG 360+400, D-G 14+16, D-H 225 in-BS 320	Vrečka z dvojnim filtrom	193 936	1 kos	35,90 €
	D-LE 255E, D-LE 260E in D-TA 50+52	Filter vrečka iz flisa	193 937	1 kos	31,90 €
	WP-EX 10, -2000 in -3000	Filtrirna vrečka	193 940	2 kos.	45,90 €
Wassermann	LSG02 in SG1/2	Filtrirna vrečka	193 941	3 kos.	103,00 €
	SG1/1 in SG2/2	Filtrirna vrečka	193 942	4 kos.	128,00 €
	V4000, V4010 in V4011	Filtrirna vrečka	193 945	3 kos.	28,90 €
Zubler	V4050	Filtrirna vrečka	193 946	1 kos	44,90 €
	V4000, V4010, V4011, V6000 in V7000	Fini filter	193 947	1 kos	58,90 €
	Z1 ECO/ Z1 CAM	Filtrirna vrečka	193 948	1 kos	44,90 €



Komplet instrumentov

Vsebuje:

1 merilo, po 1 ravne in upognjene prijemalke, 1 ravne škarje za folijo, 1 pinceta za spajkanje, 1 pinceta LC, po 1 nož Fahnenstock za vosek velik in majhen, po 1 instrument za modeliranje LeCron in Zahle

	Komplet instrumentov v etuiju,	1	
081 937	10-delni	komplet	75,90 €



Komplet za keramiko

Vsebuje:

1 lopatica, 1 modelirni instrument, 1 instrument za graviranje, 1 tanek nož, 1 majhen in 1 velik dozator, 1 ravne in ukrivljene prijemalke, 1 prijemalke z diamantno konico.


	Komplet za keramiko v etuiju,	1	
081 938	9-delni	komplet	113,00 €



Keramični dozirnik

Za varčen odvzem keramičnih mas, z dvema konicama.

081 918	Slika 1 (Ø 4 + 6 mm) (1.)	1 kos	15,20 €
081 919	Slika 2 (Ø 8 + 12 mm) (2.)	1 kos	15,20 €

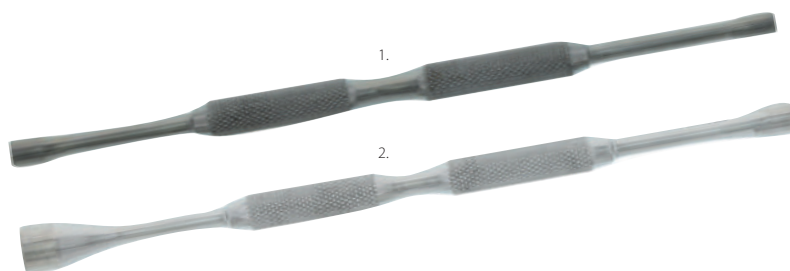

Jacket-Grip

Občutljiva razcepna pinceta z diamantnimi vložki za varno držanje ogrodij in primarnega dela med teleskopskim delom. Z zamenljivimi diamantnimi vložki.

081 964	upognjene 14 cm	1 kos	31,90 €
----------------	-----------------	-------	----------------






Teleskopske klešče z diamantno prevleko

Po Böhmu, dober oprijem notranjih teleskopov zaradi konic z diamantno prevleko.

298 963 Dolžina 12 cm 1 kos **74,90 €**

298 961 Dolžina 15 cm 1 kos **77,90 €**

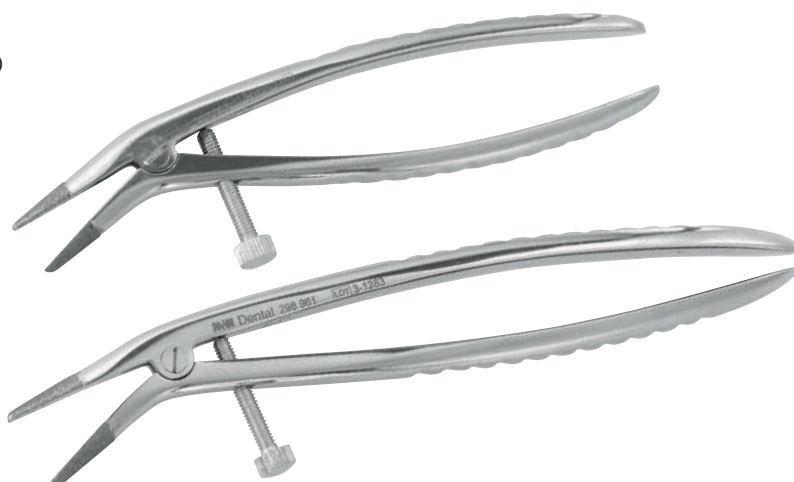

Posebne teleskopske klešče

Najboljši oprijem za vsako krono zaradi posameznih in zamenljivih diamantnih konic. Dolžina 11,6 cm. 2 diamantni konici z držalom FG (Ø 1,6 mm) sta vključeni v obseg dobave.

300 985 Posebne teleskopske klešče 1 kos **78,80 €**

Nadomestna diamantna konica v obliki plamena

300 986 Ø = 1,6 mm 1 kos **5,90 €**




Prijemalke

Arterijske prijemalke za držanje kron in ogrodij. Obroč omogoča odlaganje izdelkov brez stika s površino mize.

300 980 ravne 12,5 cm (1.) 1 kos **26,20 €**

300 981 upognjene 12,5 cm (2.) 1 kos **26,20 €**

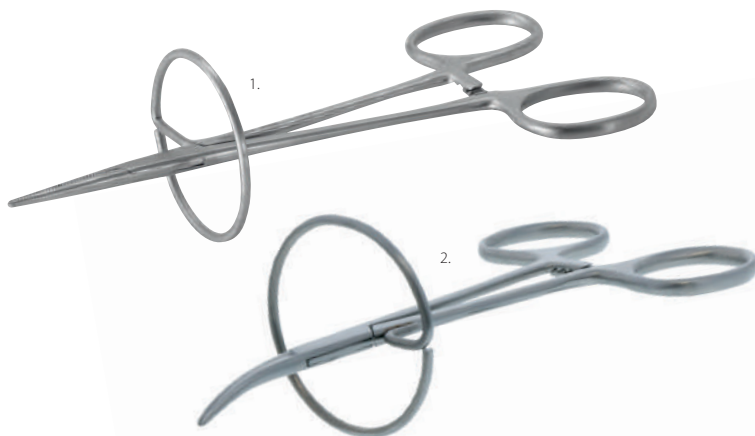

Diamantna prijemalka

Iz nerjavečega jekla z diamantnimi konicami za varno in nežno pritrdjevanje kron in mostičkov med fasetiranjem.

298 955 Prijemalka »Diamant« 1 kos **31,50 €**




Instrumenti za modeliranje K+B

Št. 1: Za nanašanje in predhodno modeliranje velikih površin. Ukrivljen del je namenjen oblikovanju področja neba.

Št. 2: Z rezalnim in modelirnim delom za oblikovanje predelov zobnega vratu.

Št. 3: Lopatka za mešanje dentinskih in talilnih materialov.

081 971	Št. 1	1 kos	7,80 €
081 972	Št. 2	1 kos	7,80 €
081 973	Št. 3	1 kos	7,80 €

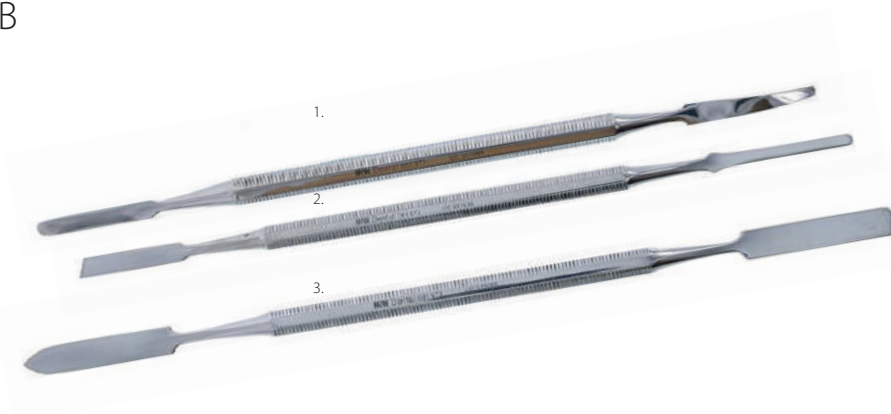

Model-Art

En instrument za številne uporabe. Ergonomsko držalo za rezila s tremi različnimi oblikami za ločevanje, rezanje, plastenje in modeliranje. Prilagodljiva rezila se uporabljajo za modeliranje voska, plastenje keramike ali pri tehniki fasetiranja umetnih mas.

Komplet: Držalo za rezilo,		1	
800 900	3 x 2 različni rezili, etui	komplet	29,90 €
Nadomestna rezila, 6 kos.			
800 901	(3 x 2 različni rezili)	1 pak.	11,90 €



Instrumenti za modeliranje Color K+B

Zaradi ojačanih ročajev je instrumente pri delu lažje držati, barvne oznake pa omogočajo lažje razlikovanje. Rezilo iz kaljenega jekla.

181 975	modra	1 kos	10,20 €
181 976	rdeča	1 kos	10,20 €
181 977	rumena	1 kos	10,20 €





Kladivo iz roga

Za zgostitev dentinske mase, iz kravjega roga.

081 931 20 cm dolg 1 kos **12,90 €**



Kladivo za kovičenje

Z lesenim ročajem.

298 975 21 cm dolg, koničast 1 kos **26,50 €**



Škarje za krone

Iz nerjavečega jekla.

298 948 ravne 1 kos **7,80 €**

298 949 upognjene 1 kos **7,80 €**



Klešče za rezanje mavca

Iz nerjavečega jekla, robustna zasnova.

298 953 Dolžina 20 cm 1 kos **29,90 €**



Tehnične klešče

Kakovost 1a, nerjavno jeklo. Instrumenti nemške proizvodnje izpolnjujejo najvišje zahteve glede kakovosti. Izdelani so iz nerjavnega jekla z najsodobnejšimi specializiranimi stroji. Zahvaljujoč matirani in vodno polirani površini so tudi zelo odporni.



Univerzalne klešče

16 cm, najv. 1,0 mm

181 956

36,80 €



Waldsachs

15 cm, najv. 1,0 mm

181 957

43,80 €



Votlo grlo

13 cm, najv. 0,7 mm

181 958

29,80 €



Okrogle klešče

14 cm, najv. 0,9 mm

181 959

39,80 €



Ploščate klešče gladke

13,5 cm

181 960

29,80 €



Ploščate klešče nazobčane

13,5 cm

181 961

29,80 €



Aderer majhne

11,5 cm, najv. 0,7 mm

181 962

32,80 €



Aderer velike

12,5 cm, najv. 0,7 mm

181 963

34,80 €



Angle

12,5 cm, najv. 0,7 mm

181 964

39,80 €



Klešče za upogibanje

12,5 cm, najv. 1,5 mm

181 965

31,80 €



Klešče za rezanje s karbidnim vložkom

15 cm, najv. 1,0 mm

181 966

53,80 €



Stojalo za klešče

Praktično stojalo iz nerjavnega jekla za do 10 klešč. Z nedrsečimi silikonskimi nogicami.

300 999 Dolžina 16 cm 1 kos **33,90 €**



Držalo za orodje

Robustno držalo za orodje iz nerjavnega jekla z 8 izrezi za instrumente in čopiče. 140 mm dolga stranica z omejevalniki na straneh omogoča varno obešanje klešč, škarij in sponk. Luknjice na hrbtni strani omogočajo opcijno montažo na steno. Dimenzije (V x Š x G): 140 x 150 x 75 mm, teža: 515 g.

300 984 Držalo za orodje 1 kos **29,20 €**



Prijemalka za kivete

Za prenašanje vročih livnih kivet.

081 932 Dolžina 31 cm 1 kos **32,90 €**

298 974 Dolžina 43 cm 1 kos **24,90 €**



Hitri merilnik Dial Caliper

Analogni hitri merilnik z zamenljivimi merilnimi konicami za določanje debeline stene krone iz kovine ali voska.

Merilno območje: 0–10 mm

Natančnost odčitavanja: 0,1 mm

Hitri merilnik Dial Caliper,
800 902 po 1 konica za kovino in vosek 1 kos **75,90 €**



Merilo

Merilo za merjenje debeline sten kron. Konice za vosčene modele imajo obliko kapljice, s čimer se preprečijo poškodbe modelov. Odčitavanje z obeh strani.

398 982 Kakovost 1a, za vosek 1 kos **28,90 €**

398 981 Kakovost 1a, za kovine 1 kos **28,90 €**

161 950 Za kovine 1 kos **15,20 €**





Transportni zaboji

Za varno prenašanje širokega spektra zobozdravstvenih izdelkov, vključno z artikulatorji. Primerne tudi za shranjevanje modelov. Dimenzije (V x Š x G): Kovček za artikulacijo: 190 x 190 x 190 mm, kovček za modele: 250 x 60 x 150 mm.

100 865 Kovček za artikulacijo moder 1 kos **13,50 €**

100 866 Kovček za modele moder 1 kos **10,50 €**



Škatla za modele

Zelo ugodne škatle za pošiljanje in shranjevanje modelov itd. Dimenzije (D x Š x V): 139 x 195 x 71 mm. Naravna barva.

000 988 Transportni zaboj 1 kos **1,60 €**
50 kos. in več na kos **1,40 €**



Vrečka z dvojnim razdelkom

Vrečka z dvojnim razdelkom za pošiljanje odtisov, modelov itd. Praktičen žep za vlaganje omogoča lažje pošiljanje naročilnic in zapiskov, ne da bi jih poškodovale tekočine v vrečki. Glavni razdelek je mogoče enostavno zapreti z zapiralom. Na treh trakvih za oznake je prostor za opombe. Dimenzije: 180 x 245 (225) mm.

045 996 z logotipom M+W, 100 kos. 1 pak. **17,90 €**





Škatle za modele

S praktičnim sistemom označevanja, ki odpravlja težave z odstranjevanjem starih nalepk. Nalepka je že vključena v obseg dobave. Iz polistirena, ki ga je mogoče 100-odstotno reciklirati in je odporen na udarce. Dimenzije (D x Š x V): 308 x 85 x 70 mm.

300 910	bela	1 kos	3,40 €
300 911	turkizna	1 kos	3,40 €
300 912	vijolična	1 kos	3,40 €
300 913	modra	1 kos	3,40 €
300 914	rumena	1 kos	3,40 €
300 916	rdeča	1 kos	3,40 €
300 917	zelena	1 kos	3,40 €
300 918	oranžna	1 kos	3,40 €
300 919	magenta	1 kos	3,40 €
300 920	meta	1 kos	3,40 €
300 921	temno siva	1 kos	3,40 €
	20 kosov ali več ene barve	na kos	3,20 €
	100 kosov ali več ene barve	na kos	2,90 €
300 915	Nalepke, 25 kos.	1 pak.	3,10 €



Laboratorijske posode

Praktični laboratorijski zaboji z dodatnim predalom za majhne dele. Možnost zlaganja enega na drugega. Dimenzije (Š x G x V): 16 x 23 x 7 cm.

399 960	rumena	1 kos	6,20 €
399 961	rdeča	1 kos	6,20 €
399 962	modra	1 kos	6,20 €
399 963	siva	1 kos	6,20 €
	10 kosov ali več ene barve	na kos	5,70 €